

GENIALE DA TUTTI I PUNTI DI VISTA

La soluzione per 3 utilizzi, tanto semplice quanto buona: Debrisoft®

Che si tratti di ferite profonde o superficiali, con la gamma Debrisoft potete essere certi di avere sempre a portata di mano il prodotto giusto per la detersione delle ferite.

Debrisoft Pad su cute secca, pergamenacea, ipercheratosica, seborroica o grassa.

Debrisoft® Lolly

Per ferite da profonde a superficiali

Debrisoft® Pad*
13 x 20 cm / 10 x 10 cm

Per ferite superficiali



Debrisoft®
Sbrigliamento ottimale.

* Potrebbe non essere ancora disponibile l'intera gamma.



People.Health.Care.

Bibliografia:

- 1) Bahr S, Mustafi N, Hättig P, Piatkowski A, Mosti G, Reimann K, Abel M, Dini V, Restelli J, Babadagi-Hardt Z, Abbritti F, Eberlein T, Wild T, Bandl K, Schmitz M. Clinical efficacy of a new monofilament fibre-containing wound debridement product. Journal of Wound Care (2011) 20 (5): 242-248 (Traduzione tedesca in: Wundmanagement (2011) 5: 260-266)
- 2) Immagini: Barbara Pritchard, Wrexham Maelor Hospital, Galles, Regno Unito
3) Immagini: Gabriele Stern, ATZ-Stern, Bocholt, Germania

Assortimento

Debrisoft® Pad per lo sbrigliamento sterile, confezionato singolarmente

Misura (cm)	Codice	UdV (pezzi)
10 x 10	34 321	5
13 x 20*	34 323	5

Debrisoft® Lolly

sterile, confezionato singolarmente

Misura (mm)	Codice	UdV (pezzi)
160	33 224	5



* Potrebbe non essere ancora disponibile l'intera gamma.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstrasse 4 · D-56579 Rengsdorf, Germany
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Vienna, Austria
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E.P. Masini 2 · I - 35131 Padova



People.Health.Care.

Debrisoft® Pad e Debrisoft® Lolly

Lo standard di riferimento per il debridement meccanico.



Debrisoft® Pad
LO standard
di riferimento

2 misure,
innumerevoli possibilità

www.Lohmann-Rauscher.com

9507517 1023 it

Questo è **DEBRISOFT® PAD**

Lo standard di riferimento per una valida ragione:
Le fibre in monofilamento brevettate di Debrisoft Pad staccano efficacemente i detriti, le impurità e l'essudato dalla ferita, li legano alla matrice di spesse fibre rimuovendoli in modo efficace, ma delicato, dalla ferita. Inoltre, Debrisoft Pad rimuove fino al 99,9%* di biofilm.

Lo sbrigliamento con Debrisoft® Pad significa:
Detersione molto efficace, ma delicata, praticamente di tutte le ferite superficiali.

Tasca per l'impugnatura sul lato posteriore

Maggior controllo

Taglio angolato delle fibre

Risultati estremamente efficienti

Bordo cucito + lato posteriore rinforzato

Utilizzo semplice

Matrice con milioni di morbide fibre

Azione delicata

**

Debrisoft® Pad
Per uno sbrigliamento senza compromessi.


* Per una gestione efficace dei biofilm, è necessario un trattamento antimicrobico dopo la detersione della ferita con Debrisoft.
** Potrebbe non essere ancora disponibile l'intera gamma.

EFFICACE come sempre!

Debrisoft® garantisce	I vostri vantaggi
 Risultati visibili rapidamente¹	Risparmiate tempo e denaro Detersione delle ferite in 2-4 minuti
 Utilizzo semplice¹ e risultati immediati	Inumidire, pulire ed è fatta 95% da buono a ottimo
 Azione praticamente indolore¹	Maggiore compliance da parte del paziente 95,4% nessun dolore o solo lievi dolori di durata transitoria durante lo sbrigliamento

Una applicazione con 1 x Debrisoft Pad

Prima di Debrisoft² | Dopo Debrisoft²

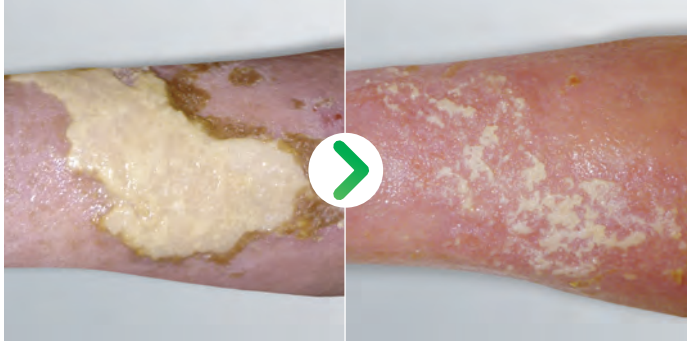

Una applicazione con 2 x Debrisoft Pad

Prima di Debrisoft³ | Dopo Debrisoft³



Molto efficiente, risultati visibili.

Debrisoft® Pad
Una classe a sé stante.

SEMPLICE per tutti!

Come si usa:

- Inumidire**
Debrisoft Pad deterge in modo efficace solo se viene prima inumidito! Debrisoft può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi cosa, dall'acqua del rubinetto alle soluzioni antimicrobiche per la detersione delle ferite. Qualunque sia la scelta, seguire le linee guida locali.
- Pulire**
Esercitando una leggera pressione, detergere la ferita utilizzando il lato in fibra morbida. Se necessario, detergere la cute che circonda la ferita con un altro Debrisoft Pad inumidito.
- Ed è fatta**
Smaltimento di Debrisoft Pad dopo l'utilizzo. Rispettare sempre le norme locali per lo smaltimento.



Debrisoft® Pad
Inumidire, pulire ed è fatta.