

en Instructions for use for Tribute® Wrap Below Knee Adjustable foam compression wrap

de Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Below Knee Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff

fr Mode d'emploi pour Tribute® Wrap Below Knee Système de compression ajustable en mousse

es Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Below Knee Sistema de compresión ajustable de espuma






it Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Below Knee Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Below Knee Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof

da Brugsanvisning til Tribute® Wrap Below Knee Justerbart kompressionssystem af plastsikum

Adjustable foam compression wrap Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff

Tribute® Wrap Below Knee

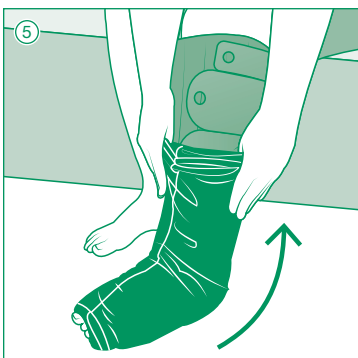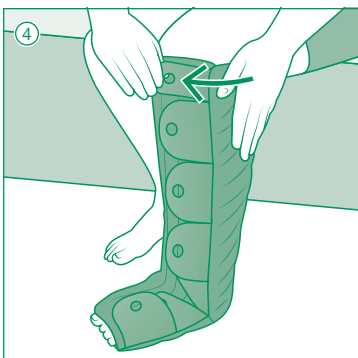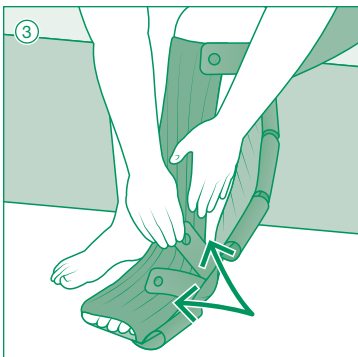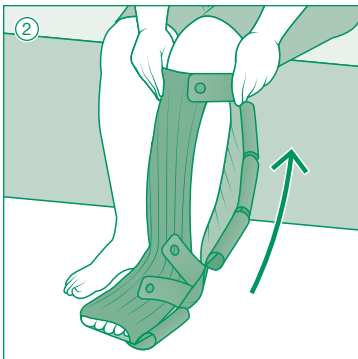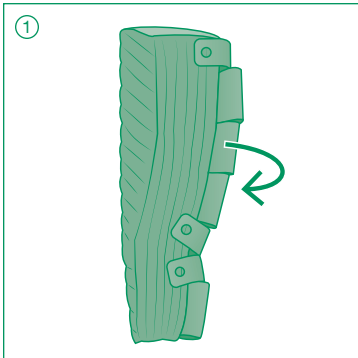

en | Instructions for use

Thank you for choosing Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Below Knee is an off-the-shelf adjustable foam garment for the self-management of lymphedema or edema of the lower leg and foot during the evening, night, or low activity. Tribute Wrap comfortably adjusts to your unique shape to help maintain gains made during therapy, while allowing the flexibility to support further reduction.

Please consult a trained medical professional prior to first use.

Indications and patient groups

- Various stages of lymphedema
- Edema

Intended uses

- Helps maintain reduced volume and shape by supporting extremities
- Management of various stages of lymphedema
- Management of edema
- Assists in softening of indurated/fibrotic tissue

Contraindications

- Arterial insufficiency or ABPI < 0.8
- Moderate to severe peripheral arterial disease
- Acute DVT
- Untreated congestive heart failure
- Untreated cancer
- Untreated infection (e.g. cellulitis)
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components
- Severe cognitive impairment

Precautions

- Impaired sensation (peripheral neuropathy)
- Cognitive impairment
- Any open wounds should be dressed prior to application

Side effects

In (very) rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Serious incident

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.


Donning instructions

- 1 **Fasten** the two narrow ankle straps and the final strap closest to your knee at the edge of the garment. Roll the remaining straps back loosely.
- 2 **Slide** your foot into the wide end of the garment and pull it up your leg.
- 3 **Pull** the two narrow ankle straps using the finger grip and fasten to the garment at an angle. Adjust for fit and comfort.
- 4 **Fasten** the remaining straps using the same process.
- 5 **Slide** the wide end of the Sleep Sleeve over the garment and fasten it 2" below the top of garment.

Note: Illustration shown with Regular length garment. Other garment lengths have slightly different strap layout.

Care instructions

L&R USA recommends all Tribute Wrap garments be washed and dried before the first extended use.

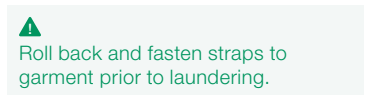

Washing

- Machine wash in cold water
- Do not use fabric softener or bleach
- Do not dry clean

Drying

- Tumble dry low heat with other laundry items
- Do not iron
- Shorten drying time by pressing out excess water with a towel or tumbling with clean tennis balls



Material content

Blend of: nylon (polyamide), polyurethane, polyester, spandex (elastane)

Not made with natural rubber latex.

Warranty

We guarantee your Tribute Wrap garment to be free of material and manufacturing defects during the recommended six month life of the garment.

Disposal

Observe current national regulations and laws for disposal of this device. Packaging marked recyclable should be properly recycled, otherwise disposed of with household waste.

de | Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für Tribute® Wrap entschieden haben!

Tribute® Wrap Below Knee ist ein gebrauchsfertiges adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff zum Selbstmanagement von Lymphödemem oder Ödemem am Unterschenkel und Fuß für abends, nachts oder bei geringer Aktivität. Tribute Wrap passt sich angenehm Ihrer individuellen Körperform an, um die in der Therapie erzielten Fortschritte zu erhalten und gleichzeitig Flexibilität für eine weitere Reduktion zu bieten.

Bitte wenden Sie sich vor der ersten Anwendung an eine geschulte medizinische Fachkraft.

Indikationen und Patientengruppen

- Verschiedene Stadien von Lymphödemem
- Ödeme

Zweckbestimmungen

- Durch Unterstützung der Extremitäten wird zum Erhalt des reduzierten Volumens und der Form beigetragen
- Behandlung verschiedener Stadien von Lymphödemem
- Behandlung von Ödemem
- Unterstützung beim Aufweichen von verhärtetem/fibrotischem Gewebe

Kontraindikationen

- Arterielle Insuffizienz oder ABPI <0,8
- Mittelschwere bis schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Akute TVT
- Unbehandelte dekompensierte Herzinsuffizienz
- Unbehandelte Krebserkrankung
- Unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten
- Starke kognitive Beeinträchtigung

Vorsichtsmaßnahmen

- Beeinträchtigte Sensibilität (periphere Neuropathie)
- Kognitive Beeinträchtigung
- Offene Wunden sollten vor der Anwendung abgedeckt werden

Nebenwirkungen

In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Anziehenanleitung

- 1 **Befestigen** Sie die beiden schmalen Knöchelbänder und das oberste Band, das Ihrem Knie am nächsten liegt, am Rand des Kompressionssystems. Rollen Sie die verbleibenden Bänder locker zurück.
- 2 **Schieben** Sie Ihren Fuß in das breite Ende des Kompressionssystems und ziehen Sie es an Ihrem Bein hoch.
- 3 **Ziehen** Sie die beiden schmalen Knöchelbänder am Fingergriff und befestigen Sie diese schräg am Kompressionssystem. Passen Sie die Position nach Passform und Komfort an.

fr | Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Below Knee est un système en mousse réglable prêt à l'emploi à utiliser dans le cadre de l'auto-traitement des lymphœdèmes ou des œdèmes de la partie inférieure de la jambe et du pied le soir, pendant la nuit ou en cas d'activités peu intenses. Tribute Wrap s'adapte confortablement à votre anatomie unique pour vous aider à préserver vos progrès acquis au cours d'une thérapie tout en offrant une flexibilité permettant une réduction supplémentaire.

Veuillez consulter un professionnel de santé qualifié avant la première utilisation.

Indications et groupes de patients

- Différents stades de lymphœdèmes
- Œdèmes

Usages prévus

- Aide à maintenir un volume et une forme réduits en supportant les extrémités
- Traitement de différents stades de lymphœdèmes
- Traitement d'œdèmes
- Contribue à assouplir les tissus indurés/fibreux

Contre-indications

- Insuffisance artérielle ou IPS <0,8
- Maladie artérielle périphérique modérée à sévère
- TVP aigue
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Cancer non traité
- Infection non traitée (par ex. cellulite)
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit
- Troubles cognitifs sévères

Précautions

- Sensations altérées (neuropathie périphérique)
- Troubles cognitifs
- Toute plaie ouverte doit être recouverte avant application

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de (très) rares cas.

Incident grave

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

Entsorgung

Befolgen Sie die geltenden nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung dieses Produktes. Verpackungen, die als recycelbar gekennzeichnet sind, sollten ordnungsgemäß recycelt und andernfalls über den Hausmüll entsorgt werden.

- 1 Attachez les deux sangles étroites de cheville et la dernière sangle la plus proche de votre genou au bord de l'accessoire. Enroulez les autres sangles sans serrer.
- 2 Glissez votre pied à travers l'extrémité large de l'accessoire et tirez ce dernier sur votre jambe.
- 3 Tirez les deux sangles étroites au niveau de votre cheville en utilisant le passe-doigt et fixez-les à l'accessoire en oblique. Ajustez pour plus de confort.
- 4 Attachez les autres sangles en répétant cette même procédure.

es | Instrucciones de uso

Gracias por elegir Tribute® Wrap.

Tribute® Wrap Below Knee es una prenda ajustable de espuma ya confeccionada para el autocuidado del linfedema o del edema de la parte inferior de la pierna y del pie durante la tarde, la noche o las horas de poca actividad. Tribute Wrap se adapta cómodamente a la forma de su cuerpo, por lo que le ayuda a mantener los avances alcanzados durante la terapia, al tiempo que ofrece flexibilidad para ayudar a una reducción posterior.

Consulte a un profesional médico capacitado antes del primer uso.

Indicaciones y grupos de pacientes

- Diversos estadios de linfedema
- Edema

Usos previstos

- Ayuda a mantener el volumen reducido y la forma brindando soporte a las extremidades
- Manejo de diversos estadios de linfedema
- Tratamiento del edema
- Ayuda a suavizar tejidos fibróticos/endurecidos

Contraindicaciones

- Insuficiencia arterial o ABPI <0.8
- Enfermedad arterial periférica de moderada a severa
- TVP aguda
- Falla cardíaca congestiva no tratada
- Cáncer no tratado
- Infección no tratada (p.ej., celulitis)
- Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto
- Deterioro cognitivo severo

Precauciones

- Sensibilidad afectada (neuropatía periférica)
- Deterioro cognitivo
- Cualquier herida abierta debe taparse con un apósito antes de la aplicación

Efectos adversos

En muy raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Incidente grave

En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.

Instrucciones de colocación

- 1 Asegure las dos correas estrechas del tobillo y la última correa más cercana a su rodilla en el borde de la prenda. Enrolle holgadamente el resto de las correas.
- 2 Introduzca el pie en el extremo ancho de la prenda y tire hacia arriba por la pierna.
- 3 Tire de las dos correas estrechas del tobillo utilizando el agarrador y asegúrelas a la prenda formando un ángulo. Ajustela para que quede cómoda y bien ajustada.
- 4 Asegure el resto de correas siguiendo el mismo proceso.

- 5 Introduzca el extremo ancho del Sleep Sleeve por encima de la prenda y asegúrelo 5 cm por debajo de la parte superior de la prenda.

Nota: Ilustración mostrada con la longitud Regular de la prenda. Otras longitudes de la prenda tienen un diseño de las correas ligeramente distinto.

Instrucciones para el cuidado

L&R USA recomienda lavar y secar las prendas Tribute Wrap antes del primer uso prolongado.



Lavado

- Lávela a máquina con agua fría
- No use suavizante ni blanqueador
- No la lave en seco

Secado

- Séquela en secadora a baja temperatura con otras prendas
- No la planche
- Acorte el tiempo de secado eliminando el exceso de agua con una toalla o secando en secadora con unas pelotas de tenis limpias



Contenido material

Mezcla de nailon (poliamida), poliuretano, poliéster, spandex (elastano)

No fabricado a partir de látex de caucho natural.

Garantía

Garantizamos que su prenda Tribute Wrap estará libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo recomendado de vida útil de seis meses de la prenda.

Eliminación

Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.

en
Instructions for use for Tribute® Wrap Below Knee Adjustable foam compression wrap

de
Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Below Knee
Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff






fr
Mode d’emploi pour Tribute® Wrap Below Knee
Système de compression ajustable en mousse

es
Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Below Knee
Sistema de compresión ajustable de espuma

it
Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Below Knee
Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl
Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Below Knee
Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof

da
Brugsanvisning til Tribute® Wrap Below Knee
Justerbart kompressionssystem af plastskum

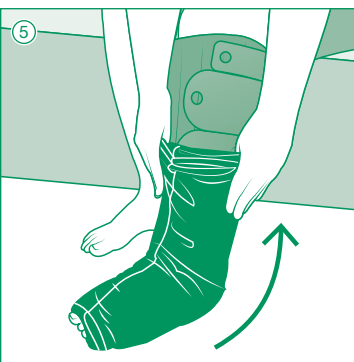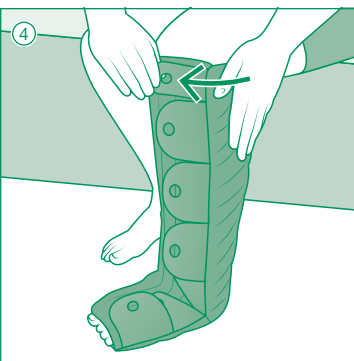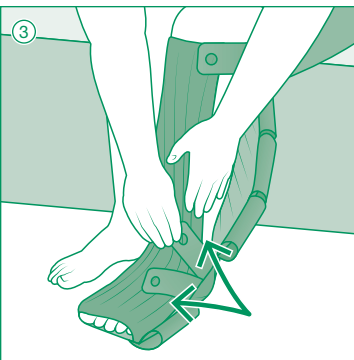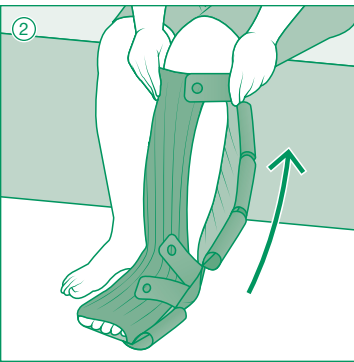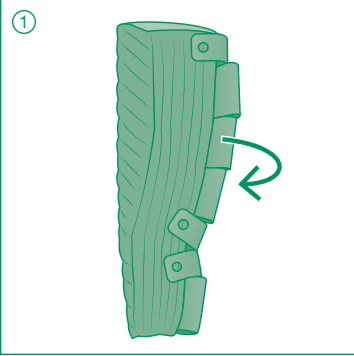

it | Istruzioni per l'uso

Grazie di aver scelto Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Below Knee è un sistema compressivo con imbottitura, regolabile, preconfezionato, per l'autogestione del linfedema e dell'edema della parte inferiore della gamba e del piede alla sera, durante la notte o in periodi di bassa attività. Tribute Wrap si adatta in modo confortevole all'anatomia individuale per aiutare a mantenere i progressi compiuti durante la terapia, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per supportare ulteriori riduzioni.

Consultare un medico specializzato prima di utilizzare il sistema per la prima volta.

Indicazioni e gruppi di pazienti

- Vari stadi del linfedema
- Edema

Destinazioni d'uso

- Aiuta a ridurre il volume e mantenere la circonferenza e la forma degli arti
- Gestione dei vari stadi del linfedema
- Gestione dell'edema
- Aiuta ad ammorbidire il tessuto indurito/fibrotico

Controindicazioni

- Insufficienza arteriosa o ABPI < 0,8
- Arteriopatia periferica da moderata a grave
- Trombosi venosa profonda acuta
- Insufficienza cardiaca congestizia non trattata
- Cancro non trattato
- Infezione non trattata (ad es., cellulite)
- Allergia e/o ipersensibilità note nei confronti di uno dei componenti del prodotto
- Grave deterioramento cognitivo

Misure precauzionali

- Sensibilità compromessa (neuropatia periferica)
- Deterioramento cognitivo
- Eventuali ferite aperte devono essere medicate prima dell'applicazione

Effetti indesiderati

In casi (molto) rari possono manifestarsi irritazioni cutanee e/o allergie.

Incidente grave
In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.

Istruzioni per indossare l'elemento

① Allacciare i due strap stretti della caviglia e lo strap finale più vicino al ginocchio e al bordo dell'elemento. Ribaltare all'indietro e allentare gli strap restanti.

② Infilare il piede nell'estremità larga dell'elemento e tirarlo su lungo la gamba.

③ Tirare i due strap stretti della caviglia utilizzando la presa per dita e allacciarli ad angolo sull'elemento. Regolare vestibilità e comfort.

④ Allacciare gli strap restanti seguendo la stessa procedura.

- ⑤ Infilare l'estremità larga dello Sleep Sleeve sopra l'elemento e allacciarlo 5 cm sotto la parte superiore dell'elemento stesso.

Nota: nell'illustrazione viene utilizzato un elemento di lunghezza Regular. Negli elementi con altre lunghezze la disposizione degli strap differisce leggermente.

Istruzioni per la cura

L&R USA consiglia di lavare e asciugare tutti gli elementi Tribute Wrap prima del primo utilizzo prolungato.

▲ Ribaltare all'indietro e agganciare gli strap all'elemento prima di lavarlo.

Lavaggio

- Lavare a freddo in lavatrice
- Non utilizzare ammorbidenti o candeggina
- Non lavare a secco

Asciugatura

- Asciugare a bassa temperatura nell'asciugatrice insieme alla biancheria
- Non stirare
- Per abbreviare il tempo di asciugatura, assorbire l'acqua in eccesso con un asciugamano o inserire palle da tennis pulite nell'asciugatrice.

🧺 ✳️ 🚫 🧺 🚫

Contenuto del materiale
Materiale in misto nylon (poliammide), poliuretano, poliestere e spandex (elastan)

Non fabbricato con lattice di gomma naturale.

Garanzia
Il suo elemento Tribute Wrap è garantito essere privo di difetti di materiale e di produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Smaltimento

Rispettare le normative e le leggi nazionali vigenti per lo smaltimento di questo dispositivo. La confezione contrassegnata come riciclabile deve essere riciclata correttamente; in caso contrario smaltire con i rifiuti domestici.

nl | Gebruiksaanwijzing

Fijn dat u voor Tribute® Wrap hebt gekozen!

Tribute® Wrap Below Knee is een kant-en-klaar instelbaar compressiesysteem met schuim voor het behandelen van lymfoedeem of oedeem van het onderbeen en de voet tijdens de avond, nacht of lichte activiteiten. Tribute Wrap past zich moeiteloos aan uw unieke vorm aan om u te helpen de oedeemvermindering die u tijdens de behandeling hebt bereikt, te behouden terwijl het flexibel genoeg is om verdere vermindering mogelijk te maken.

Raadpleeg een hiervoor opgeleide zorgverlener voordat u het product de eerste keer gebruikt.

Indicaties en patiëntgroepen

- Diverse stadia van lymfoedeem
- Oedeem

Beoogd gebruik

- Helpt verminderd volume en vorm te behouden door extremiteiten te ondersteunen
- Behandelen van diverse stadia van lymfoedeem
- Behandelen van oedeem
- Helpt bij het verzachten van verhard of fibrotisch weefsel

Contra-indicaties

- Arteriële insufficiënte of een ABPI < 0,8
- Matig tot ernstig perifeer arterieel vaatlijden
- Acute DVT (diep-veneuzie trombose)
- Onbehandeld congestief hartfalen
- Onbehandelde kanker
- Onbehandelde infectie (bv. cellulitis)
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan
- Ernstige cognitieve stoornissen

Voorzorgsmaatregelen

- Gevoelstoornissen (zoals bij perifere neuropathie)
- Cognitieve stoornissen
- Eventuele open wonden moeten eerst worden afgedekt

Bijwerkingen

In (zeer) zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Ernstig incident

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

Aanbrenginstructies

① Bevestig de twee smalle enkelbanden en de laatste band die zich het dichtst bij de knie bevindt aan de rand van het verband. Rol de overige banden losjes terug.

② Schuif uw voet in het brede uiteinde van het verband en trek het verband over uw been.

③ Trek de twee smalle enkel banden aan met de vingergreep en bevestig ze onder een hoek op het verband. Pas aan voor pasvorm en comfort.

④ Bevestig de overige banden op dezelfde manier.

da | Brugsanvisning

Tak, fordi du har valgt Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Below Knee er et justerbart kompressionssystem af skum, som fås i håndkøb, til selvbehandling af lymfødem eller ødem i underbenene og fødderne om aftenen, natten eller i perioder med lav aktivitet. Tribute Wrap tilpasser sig din unikke form på en behagelig måde som en hjælp til at bevare fremskridt, der er blevet gjort under behandling, og giver samtidig fleksibilitet til at understøtte yderligere reduktion.

Rådfor dig med uddannet sundhedspersonale før første anvendelse.

▲ Rol de banden terug en bevestig deze aan de handschoen voordat u het product wast.

Wassen

- Wassen in de machine met koud water
- Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel
- Niet chemisch reinigen

Drogen

- In de droger drogen bij lage temperatuur met andere was
- Niet strijken
- De droogtijd kan worden verkort door overtollig water met een handdoek eruit te drukken of een droger met schone tennisballen te gebruiken

🧺 ✳️ 🚫 🧺 🚫

Materialen

Mix van: nylon (polyamide), polyurethaan, polyester, spandex (elastaan)

Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie

Wij garanderen dat uw Tribute Wrap-verband vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maanden gebruiksduur van het verband.

Weggooien

Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooien van dit product in acht. Verpakking die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

Påtagning

① Fastgør de to smalle ankelremme og den sidste rem tættest på dit knæ i kanten af produktet. Rul de øvrige remme løst tilbage.

② Skub din fod ind i produktets brede ende, og træk det op ad dit ben.

③ Træk i de to smalle ankelremme ved hjælp af fingergrebet, og fastgør dem til produktet i en vinkel. Justér for pasform og komfort.

④ Fastgør de øvrige remme ved anvendelse af samme fremgangsmåde.

- ⑤ Skub den brede ende af Sleep Sleeve over produktet, og fastgør det 5 cm under produktets top.

Bemærk: Illustrationen viser et produkt med Regular længde. Andre produktlængder kan have en lidt anderledes remfordeling.

Plejeanvisninger

L&R USA anbefaler, at alle Tribute Wrap-produkter vaskes og tørres før første længere tids anvendelse.

▲ Rul remmene tilbage, og fastgør dem til produktet før vask.

Vask

- Vaskes i vaskemaskine med koldt vand
- Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel
- Brug ikke kemisk rens

Tørring

- Tørres i tørretumbler ved lav varme og uden andet vasketøj
- Må ikke stryges
- Tørretiden kan forkortes ved at trykke overskydende vand ud med et håndklæde eller ved at tørretumble produktet med rene tennisbolde

🧺 ✳️ 🚫 🧺 🚫

Materieindhold
Blanding af: Nylon (polyamid), polyurethan, polyester, spandex (elastan)

Ikke fremstillet med naturgummilatex.

Garanti

Vi garanterer, at dit Tribute Wrap-produkt er uden materiale- og produktionsfejl i produktets anbefalede levetid på seks måneder.

Bortskaffelse

Ved bortskaffelse af denne anordning skal de aktuelle nationale regler og love følges. Emballage, der er mærket som genanvendelig, skal indsamles korrekt til genanvendelse. Hvis ikke skal den bortskaffes med husholdningsaffaldet.

AE
L&R Middle East DMCC
HDS Tower, Unit 3106, Cluster F
Jumeirah Lakes Towers,
P.O. Box 336 351
Dubai/UAE

+971 4 442 4621
ReadyWrap@ae.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

AT
Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4
1140 Wien,
Österreich

+43 1 57670-400
info@at.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.at

AU
Lohmann & Rauscher Pty Ltd.
321 Ferntree Gully Road
Mount Waverley
Victoria 3149
Australia

1300 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

CH
Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Schweiz

+41 71 2742570
info@ch.LRMed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

DE
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
D-56579 Rengsdorf
Deutschland

+49 (0) 2634 99-0
info@de.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.de

DK
Lohmann & Rauscher A/S
Højnæsgaard, Gongehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Danmark

+45 45 89 02 25
info@dk.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.dk

GB
L&R Medical UK Ltd.
1 Wellington Court, Lancaster Park,
Needwood, Burton on Trent
Staffordshire DE13 9PS
The United Kingdom

08450 606707
customersolutions@uk.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.co.uk

IT
Lohmann & Rauscher s.r.l.
via E. Fermi, 4
35030 Sarmeola di Rubano
Italia

+39 049 744 66 00
info@it.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

NL
Lohmann & Rauscher B.V
Antennestraat 86 B
1322 AS Almere
Nederland

036 546 30 20
ReadyWrap@nl.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

NZ
Lohmann & Rauscher Limited
21 Queen Street
Auckland 1010
New Zealand

0800 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

US
L&R USA INC.
3880 W Wheelhouse Road
Milwaukee, WI 53208
USA

855-892-4140
inquiries@us.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.us