



en Instructions for use for Tribute® Wrap Glove Adjustable foam compression wrap

de Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Glove Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff

fr Mode d'emploi pour Tribute® Wrap Glove Système de compression ajustable en mousse

es Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Glove Sistema de compresión ajustable de espuma




it Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Glove Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Glove Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof

da Brugsanvisning til Tribute® Wrap Glove Justerbart kompressionssystem af plastskum

Adjustable foam compression wrap
Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff

Tribute® Wrap Glove

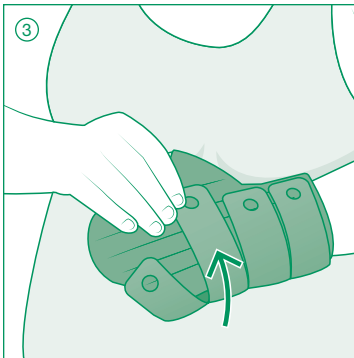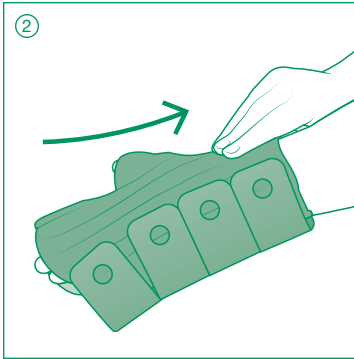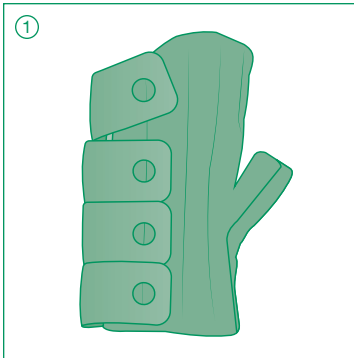

en | Instructions for use

Thank you for choosing Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Glove is an off-the-shelf adjustable foam garment for the self-management of lymphedema or edema of the hand during the evening, night, or low activity. Tribute Wrap comfortably adjusts to your unique shape to help maintain gains made during therapy, while allowing the flexibility to support further reduction.

Please consult a trained medical professional prior to first use.

Indications and patient groups

- Various stages of lymphedema
- Edema

Intended Uses

- Helps maintain reduced volume and shape by supporting extremities
- Management of various stages of lymphedema
- Management of edema
- Assists in softening of indurated/fibrotic tissue

Contraindications

- Arterial insufficiency or ABPI < 0.8
- Moderate to severe peripheral arterial disease
- Acute DVT
- Untreated congestive heart failure
- Untreated cancer
- Untreated infection (e.g. cellulitis)
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components
- Severe cognitive impairment

Precautions

- Impaired sensation (peripheral neuropathy)
- Cognitive impairment
- Any open wounds should be dressed prior to application

Side effects

In (very) rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Serious incident

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.


Donning instructions

- ① Fasten the narrow straps at the edge of the glove.
- ② Slide your hand into the glove ensuring your fingers align in the individual spacers and thumb in separate thumb space.
- ③ Pull the three straps closest to your wrist using the finger grip and fasten to the garment.
- ④ Pull the last strap and fasten to the garment at an angle. Adjust all straps for fit and comfort.

- ⑤ Slide the Sleep Sleeve over the glove leaving 1" at both ends of the glove and fasten.

Care instructions

L&R USA recommends all Tribute Wrap garments be washed and dried before the first extended use.

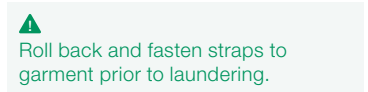

Washing

- Machine wash in cold water
- Do not use fabric softener or bleach
- Do not dry clean

Drying

- Tumble dry low heat with other laundry items
- Do not iron
- Shorten drying time by pressing out excess water with a towel or tumbling with clean tennis balls



Material content

Blend of: nylon (polyamide), polyurethane, polyester, spandex (elastane)

Not made with natural rubber latex.

Warranty

We guarantee your Tribute Wrap garment to be free of material and manufacturing defects during the recommended six month life of the garment.

Disposal

Observe current national regulations and laws for disposal of this device. Packaging marked recyclable should be properly recycled, otherwise disposed of with household waste.

de | Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für Tribute® Wrap entschieden haben!

Tribute® Wrap Glove ist ein gebrauchsfertiges adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff zum Selbstmanagement von Lymphödemem oder Ödemem an der Hand für abends, nachts oder bei geringer Aktivität. Tribute Wrap passt sich angenehm Ihrer individuellen Körperform an, um die in der Therapie erzielten Fortschritte zu erhalten und gleichzeitig Flexibilität für eine weitere Reduktion zu bieten.

Bitte wenden Sie sich vor der ersten Anwendung an eine geschulte medizinische Fachkraft.

Indikationen und Patientengruppen

- Verschiedene Stadien von Lymphödemem
- Ödeme

Zweckbestimmungen

- Durch Unterstützung der Extremitäten wird zum Erhalt des reduzierten Volumens und der Form beigetragen
- Behandlung verschiedener Stadien von Lymphödemem
- Behandlung von Ödemem
- Unterstützung beim Aufweichen von verhärtetem/fibrotischem Gewebe

Kontraindikationen

- Arterielle Insuffizienz oder ABPI <0,8
- Mittelschwere bis schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Akute TVT
- Unbehandelte dekompensierte Herzinsuffizienz
- Unbehandelte Krebserkrankung
- Unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten
- Starke kognitive Beeinträchtigung

Vorsichtsmaßnahmen

- Beeinträchtigte Sensibilität (periphere Neuropathie)
- Kognitive Beeinträchtigung
- Offene Wunden sollten vor der Anwendung abgedeckt werden

Nebenwirkungen

In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Anziesanleitung

- ① Befestigen Sie die schmalen Bänder am Rand des Handschuhs.
- ② Schieben Sie Ihre Hand in den Handschuh und achten Sie darauf, Ihre Finger auf die individuellen Öffnungen und den Daumen auf die Daumenöffnung auszurichten.
- ③ Ziehen Sie die drei Bänder, die Ihrem Handgelenk am nächsten sind, am Fingergriff und befestigen Sie diese am Kompressionssystem.
- ④ Ziehen Sie am letzten Band und befestigen Sie dieses schräg am Kompressionssystem. Passen Sie alle Bänder nach Passform und Komfort an.
- ⑤ Schieben Sie den Sleep Sleeve über den Handschuh, lassen Sie dabei 2,5 cm an beiden Enden des Handschuhs frei und befestigen Sie ihn.

Pflegehinweise

L&R USA empfiehlt, alle Tribute Wrap Kompressionssysteme vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen.



Waschen

- Maschinenwäsche in kaltem Wasser
- Keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden
- Nicht chemisch reinigen

Trocknen

- Trocknerprogramm bei niedriger Hitze mit anderen Wäschestücken
- Nicht bügeln
- Sie können die Trocknungszeit verkürzen, indem Sie überschüssiges Wasser mit einem sauberen Handtuch ausdrücken. Geben Sie saubere Tennisbälle mit in den Trockner.



Materialien

Mischung aus: Nylon (Polyamid), Polyurethan, Polyester, Elasthan

Hergestellt ohne Naturkautschuklatex.

Garantie

Wir gewährleisten, dass das Tribute Wrap Kompressionssystem während der empfohlenen sechsmonatigen Verwendungsdauer keine Material- oder Produktionsfehler aufweist.

Entsorgung

Befolgen Sie die geltenden nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung dieses Produktes. Verpackungen, die als recycelbar gekennzeichnet sind, sollten ordnungsgemäß recycelt und andernfalls über den Hausmüll entsorgt werden.

fr | Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Glove est un système en mousse réglable prêt à l'emploi à utiliser dans le cadre de l'auto-traitement des lymphœdèmes ou des œdèmes de la main le soir, pendant la nuit ou en cas d'activités peu intenses. Tribute Wrap s'adapte confortablement à votre anatomie unique pour vous aider à préserver vos progrès acquis au cours d'une thérapie tout en offrant une flexibilité permettant une réduction supplémentaire.

Veuillez consulter un professionnel de santé qualifié avant la première utilisation.

Indications et groupes de patients

- Différents stades de lymphœdèmes
- Œdèmes

Usages prévus

- Aide à maintenir un volume et une forme réduits en supportant les extrémités
- Traitement de différents stades de lymphœdèmes
- Traitement d'œdèmes
- Contribue à assouplir les tissus indurés/fibreux

Contre-indications

- Insuffisance artérielle ou IPS <0,8
- Maladie artérielle périphérique modérée à sévère
- TVP aigue
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Cancer non traité
- Infection non traitée (par ex. cellulite)
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit
- Troubles cognitifs sévères

Précautions

- Sensations altérées (neuropathie périphérique)
- Troubles cognitifs
- Toute plaie ouverte doit être recouverte avant application

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de (très) rares cas.

Incident grave

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.



Instructions d'enfilage

- ① Attachez les sangles étroites au bord du gant.
- ② Glissez votre main dans le gant en insérant chacun de vos doigts dans les séparateurs individuels et votre pouce dans l'espace prévu à cet effet.
- ③ Tirez les trois sangles les plus proches de votre poignet en utilisant le passe-doigt et fixez l'accessoire.
- ④ Tirez la dernière sangle et fixez-la à l'accessoire sur un angle. Ajustez toutes les sangles pour plus de confort.
- ⑤ Glissez le Sleep Sleeve sur le gant en laissant 2,5cm de chaque côté du gant et fixez-le.

Conseils d'entretien

L&R USA recommande de nettoyer et de sécher tous les systèmes Tribute Wrap avant la première utilisation prolongée.



Lavage

- Laver à la machine à l'eau froide
- Ne pas utiliser d'adoucissant, ne pas blanchir
- Ne pas nettoyer à sec

Séchage

- Séchage en machine à faible température avec d'autres vêtements
- Ne pas repasser
- La durée de séchage peut être raccourcie en essorant l'excédent d'eau avec une serviette ou en séchant en machine avec des balles de tennis propres



Composition

Mélange de : nylon (polyamide), polyuréthane, polyester, spandex (élasthanne)

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Garantie

Nous garantissons un système Tribute Wrap exempt de défauts de matériaux et de fabrication au cours de ses six mois de durée de vie recommandée.

Élimination

Veuillez éliminer cet accessoire dans le respect des réglementations et des législations nationales en vigueur. Les emballages marqués comme recyclables doivent être correctement recyclés ou éliminés avec les déchets ménagers.

es | Instrucciones de uso

Gracias por elegir Tribute® Wrap.

Tribute® Wrap Glove es una prenda ajustable de espuma ya confeccionada para el autocuidado del linfedema o del edema de la mano durante la tarde, la noche o las horas de poca actividad. Tribute Wrap se adapta cómodamente a la forma de su cuerpo, por lo que le ayuda a mantener los avances alcanzados durante la terapia, al tiempo que ofrece flexibilidad para ayudar a una reducción posterior.

Consulte a un profesional médico capacitado antes del primer uso.

Indicaciones y grupos de pacientes

- Diversos estadios de linfedema
- Edema

Usos previstos

- Ayuda a mantener el volumen reducido y la forma brindando soporte a las extremidades
- Manejo de diversos estadios de linfedema
- Tratamiento del edema
- Ayuda a suavizar tejidos fibróticos/endurecidos

Contraindicaciones

- Insuficiencia arterial o ABPI <0.8
- Enfermedad arterial periférica de moderada a severa
- TVP aguda
- Falla cardíaca congestiva no tratada
- Cáncer no tratado
- Infección no tratada (p.ej., celulitis)
- Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto
- Deterioro cognitivo severo

Precauciones

- Sensibilidad afectada (neuropatía periférica)
- Deterioro cognitivo
- Cualquier herida abierta debe taparse con un apósito antes de la aplicación

Efectos adversos

En muy raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Incidente grave

En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.

Instrucciones de colocación

- ① Asegure las correas estrechas en el borde del guante.
- ② Introduzca la mano en el guante asegurándose de que los dedos se alinean con los espaciadores individuales y el dedo pulgar quede en el espacio separado para el pulgar.
- ③ Tire de las tres correas más cercanas a la muñeca utilizando el agarrador y asegúrelas a la prenda.

- ④ Tire de la última correa y asegúrela a la prenda formando un ángulo. Ajuste todas las correas para que quede cómoda y bien ajustada.

- ⑤ Introduzca el Sleep Sleeve por encima del guante, dejando 2,5 cm a ambos extremos del guante, y asegúrelo.

Instrucciones para el cuidado

L&R USA recomienda lavar y secar los sistemas Tribute Wrap antes del primer uso prolongado.



Lavado

- Lávela a máquina con agua fría
- No use suavizante ni blanqueador
- No la lave en seco

Secado

- Séquela en secadora a baja temperatura con otras prendas
- No la planche
- Acorte el tiempo de secado eliminando el exceso de agua con una toalla o secando en secadora con unas pelotas de tenis limpias



Contenido material

Mezcla de nailon (poliamida), poliuretano, poliéster, spandex (elastano)

No fabricado a partir de látex de caucho natural.

Garantía

Garantizamos que su prenda Tribute Wrap estará libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo recomendado de vida útil de seis meses de la prenda.

Eliminación

Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.



Symbol glossary provided at: www.Lohmann-Rauscher.com/symbolsglossary

en
Instructions for use for Tribute® Wrap Glove Adjustable foam compression wrap

de
Gebrauchsanweisung für Tribute® Wrap Glove Adaptives Kompressionssystem aus Schaumstoff




fr
Mode d'emploi pour Tribute® Wrap Glove Système de compression ajustable en mousse

es
Instrucciones de uso para Tribute® Wrap Glove Sistema de compresión ajustable de espuma

it
Istruzioni per l'uso di Tribute® Wrap Glove Sistema compressivo regolabile in gommapiuma

nl
Gebruiksaanwijzing voor Tribute® Wrap Glove Verstelbaar compressiesysteem van schuimstof

da
Brugsanvisning til Tribute® Wrap Glove Justerbart kompressionssystem af plastsukm

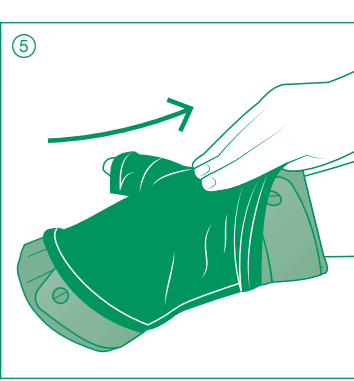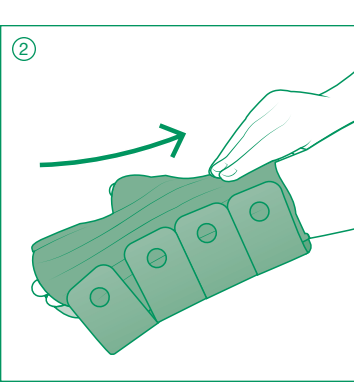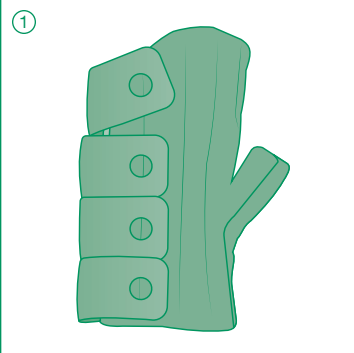

it | Istruzioni per l'uso

Grazie di aver scelto Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Glove è un sistema compressivo con imbottitura, regolabile, preconfezionato, per l'autogestione del linfedema e dell'edema della mano alla sera, durante la notte o in periodi di bassa attività. Tribute Wrap si adatta in modo confortevole all'anatomia individuale per aiutare a mantenere i progressi compiuti durante la terapia, fornendo al contempo la flessibilità necessaria per supportare ulteriori riduzioni.

Consultare un medico specializzato prima di utilizzare il sistema per la prima volta.

Indicazioni e gruppi di pazienti

- Vari stadi del linfedema
- Edema

Destinazioni d'uso

- Aiuta a ridurre il volume e mantenere la circonferenza e la forma degli arti
- Gestione dei vari stadi del linfedema
- Gestione dell'edema
- Aiuta ad ammorbidire il tessuto indurito/fibrotico

- Controindicazioni**
- Insufficienza arteriosa o ABPI < 0,8
 - Arteriopatia periferica da moderata a grave
 - Trombosi venosa profonda acuta
 - Insufficienza cardiaca congestizia non trattata
 - Cancro non trattato
 - Infezione non trattata (ad es., cellulite)
 - Allergia e/o ipersensibilità note nei confronti di uno dei componenti del prodotto
 - Grave deterioramento cognitivo

Misure precauzionali

- Sensibilità compromessa (neuropatia periferica)
- Deterioramento cognitivo
- Eventuali ferite aperte devono essere medicate prima dell'applicazione

Effetti indesiderati

In casi (molto) rari possono manifestarsi irritazioni cutanee e/o allergie.

Incidente grave

In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.

Istruzioni per indossare l'elemento

- Allacciare gli strap stretti al bordo del guanto.

- Infilare la mano nel guanto facendo attenzione che le dita siano allineate nei singoli distanziatori e che il pollice sia nello spazio apposito.

- Tirare i tre strap più vicini al polso utilizzando la presa per dita e allacciarli sull'elemento.

- Tirare l'ultimo strap e allacciarlo ad angolo sull'elemento. Regolare tutti gli strap per vestibilità e comfort.

- Infilare lo Sleep Sleeve sopra il guanto lasciando 2,5 cm a ciascuna estremità del guanto e allacciare.

Istruzioni per la cura

L&R USA consiglia di lavare e asciugare tutti gli elementi Tribute Wrap prima del primo utilizzo prolungato.

▲ Ribaltare all'indietro e agganciare gli strap all'elemento prima di lavarlo.

Lavaggio

- Lavare a freddo in lavatrice
- Non utilizzare ammorbidenti o candeggina
- Non lavare a secco

Asciugatura

- Asciugare a bassa temperatura nell'asciugatrice insieme alla biancheria
- Non strirare
- Per abbreviare il tempo di asciugatura, assorbire l'acqua in eccesso con un asciugamano o inserire palle da tennis pulite nell'asciugatrice.

🧺 🚫 🚰 ✉️ 🚫

Contenuto del materiale

Materiale in misto nylon (poliammide), poliuretano, poliestere e spandex (elastan)

Non fabbricato con lattice di gomma naturale.

Garanzia

Il suo elemento Tribute Wrap è garantito essere privo di difetti di materiale e di produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Smaltimento

Rispettare le normative e le leggi nazionali vigenti per lo smaltimento di questo dispositivo. La confezione contrassegnata come riciclabile deve essere riciclata correttamente; in caso contrario smaltire con i rifiuti domestici.

nl | Gebruiksaanwijzing

Fijn dat u voor Tribute® Wrap hebt gekozen!

Tribute® Wrap Glove is een kant-en-klaar instelbaar compressiesysteem met schuim voor zelfzorg bij lymfoedeem of oedeem van de hand tijdens de avond, nacht of lichte activiteiten. Tribute Wrap past zich moeiteloos aan uw unieke vorm aan om u te helpen de oedeemvermindering die u tijdens de behandeling hebt bereikt, te behouden terwijl het flexibel genoeg is om verdere vermindering mogelijk te maken.

Raadpleeg een hiervoor opgeleide zorgverlener voordat u het product de eerste keer gebruikt.

Indicaties en patiëntgroepen

- Diverse stadia van lymfoedeem
- Oedeem

Beoogd gebruik

- Helpt verminderd volume en vorm te behouden door extremiteiten te ondersteunen
- Behandelen van diverse stadia van lymfoedeem
- Behandelen van oedeem
- Helpt bij het verzachten van verhard of fibrotisch weefsel

Contra-indicaties

- Arteriële insufficiënte of een ABPI < 0,8
- Matig tot ernstig perifeer arterieel vaatlijden

- Acute DVT (diep-veneuze trombose)
- Onbehandeld congestief hartfalen
- Onbehandelde kanker
- Onbehandelde infectie (bv. cellulitis)
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan
- Ernstige cognitieve stoornissen

Voorzorgsmaatregelen

- Gevoelstoornissen (zoals bij perifere neuropathie)
- Cognitieve stoornissen
- Eventuele open wonden moeten eerst worden afgedekt

Bijwerkingen

In (zeer) zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Ernstig incident

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

Aanbrenginstructies

- Bevestig de smalle banden aan de rand van de handschoen.

- Schuif uw hand in de handschoen en zorg daarbij dat uw vingers goed in de afzonderlijke vingerspreiders zitten en uw duim in de afzonderlijke ruimte voor de duim.

- Trek de drie banden die zich het dichtst bij uw pols bevinden aan met de vingergreep en bevestig ze op de handschoen.

- Trek de laatste band aan en bevestig deze onder een hoek op de handschoen. Stel alle banden af voor een goede en comfortabele pasvorm.

- Schuif de Sleep Sleeve over de handschoen; laat daarbij 2,5 cm aan beide uiteinden van de handschoen vrij en zet de overtrek vast.

Onderhoudsinstructies

L&R USA raadt aan alle Tribute Wrap-verbanden te wassen en te drogen voordat ze voor het eerst gedurende langere tijd gedragen gaan worden.

▲ Rol de banden terug en bevestig deze aan de handschoen voordat u het product wast.

Wassen

- Wassen in de machine met koud water
- Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel
- Niet chemisch reinigen

Drogen

- In de droger drogen bij lage temperatuur met andere was
- Niet strijken
- De droogtijd kan worden verkort door overtollig water met een handdoek eruit te drukken of een droger met schone tennisballen te gebruiken

🧺 🚫 🚰 ✉️ 🚫

Materialen

Mix van: nylon (polyamide), polyurethaan, polyester, spandex (elastaan)

Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie

Wij garanderen dat uw Tribute Wrap-verband vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maanden gebruiksduur van het verband.

Weggooien

Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooien van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

da | Brugsanvisning

Tak, fordi du har valgt Tribute® Wrap!

Tribute® Wrap Glove er et justerbart kompressionssystem af skum, som fås i håndkøb, til selvbehandling af lymfødem eller ødem i hænderne om aftenen, natten eller i perioder med lav aktivitet. Tribute Wrap tilpasser sig din unikke form på en behagelig måde som en hjælp til at bevare fremskridt, der er blevet gjort under behandling, og giver samtidig fleksibilitet til at understøtte yderligere reduktion.

Rådfrø dig med uddannet sundhedspersonale før første anvendelse.

Indikationer og patientgrupper

- Forskellige stadier af lymfødem
- Ødem

Tilsigtede anvendelser

- Hjælper med til at bevare reduceret volumen og form ved at støtte ekstremiteterne
- Behandling af forskellige stadier af lymfødem
- Behandling af ødem
- Medvirker til at blødgøre hærdet/fibrotisk væv

Kontraindikationer

- Arteriel insufficiens eller ABPI < 0,8
- Moderat til svær perifer arteriel sygdom
- Akut DVT
- Ubehandlet højresidig hjerteinsufficiens
- Ubehandlet cancer
- Ubehandlet infektion (f.eks. cellulitis)
- Kendt allergi og/eller overfølsomhed over for en af produktkomponenterne
- Svær kognitiv svækkelse

Forsigtighedsregler

- Svækket følesans (perifer neuropati)
- Kognitiv svækkelse
- Eventuelle åbne sår skal forbindes før applicering

Bivirkninger

I (meget) sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

Alvorlig hændelse

Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

Materialen

Mix van: nylon (polyamide), polyurethaan, polyester, spandex (elastaan)

Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie

Wij garanderen dat uw Tribute Wrap-verband vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maanden gebruiksduur van het verband.

Weggooien

Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooien van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

AE

L&R Middle East DMCC
HDS Tower, Unit 3106, Cluster F
Jumeirah Lakes Towers,
P.O. Box 336 351
Dubai/UAE

+971 4 442 4621
ReadyWrap@ae.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

AT

Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4
1140 Wien,
Österreich

+43 1 57670-400
info@at.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.at

AU

Lohmann & Rauscher Pty Ltd.
321 Ferntree Gully Road
Mount Waverley
Victoria 3149
Australia

1300 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

CH

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Schweiz

+41 71 2742570
info@ch.LRMed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

DE

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
D-56579 Rengsdorf
Deutschland

+49 (0) 2634 99-0
info@de.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.de

DK

Lohmann & Rauscher A/S
Højnæsgaard, Gongehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Danmark

+45 45 89 02 25
info@dk.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.dk

GB

L&R Medical UK Ltd.
1 Wellington Court, Lancaster Park,
Needwood, Burton on Trent
Staffordshire DE13 9PS
The United Kingdom

08450 606707
customersolutions@uk.lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.co.uk

IT

Lohmann & Rauscher s.r.l.
via E. Fermi, 4
35030 Sarmeola di Rubano
Italia

+39 049 744 66 00
info@it.Lrmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

NL

Lohmann & Rauscher B.V
Antennestraat 86 B
1322 AS Almere
Nederland

036 546 30 20
ReadyWrap@nl.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com

NZ

Lohmann & Rauscher Limited
21 Queen Street
Auckland 1010
New Zealand

0800 572 869
info@au.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.com.au

US

L&R USA INC.
3880 W Wheelhouse Road
Milwaukee, WI 53208
USA

855-892-4140
inquiries@us.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.us