



People.Health.Care.

Suprasorb® P SensiFlex **NEU**

Mehr Flexibilität dank neuer
WaveCut Technology®.

Flexibel
in alle Richtungen

Weich
und anschmiegsam

Effizientes
Exsudatmanagement

Suprasorb® P SensiFlex **NEU**

Entscheiden Sie sich für das nächste Level.

Warum das nächste Level?

Eine unflexible Produktstruktur kann folgende Probleme verursachen:

- frühzeitiges Ablösen
- übermäßige Spannung auf der Wundumgebungshaut
- Druck auf die Wunde

Dies führt zu erhöhtem Zeitaufwand für Anwender und zu Verzögerungen der Wundheilung für Patienten.

Wie erreichen wir das nächste Level?

Mit der einzigartigen WaveCut Technology®

Wellenförmige Einschnitte in den Vlieskomponenten erhöhen die Flexibilität:

- reduziert den Zug auf den Rand des Wundverbandes*
- ermöglicht Bewegung in alle Richtungen
- reduziert das Risiko einer frühzeitigen Ablösung*



**WaveCut
Technology®**
for higher flexibility

Trägerschicht:

- wasserdicht und bakterienabweisend

Superabsorbierender Saugkern mit WaveCut Technology®:**

- sehr gute Absorption
- trägt zur Verringerung des Mazerationsrisikos bei

Vliesschicht mit WaveCut Technology®:


- verteilt das Exsudat

Saugfähiger Polyurethan (PU)-Schaum:

- effizientes Exsudatmanagement
- bietet Komfort und einen Polstereffekt

OptiSil Silicon-Wundkontaktschicht:

- beschränkt das Risiko des Verklebens mit der Wunde
- atraumatische Entfernung

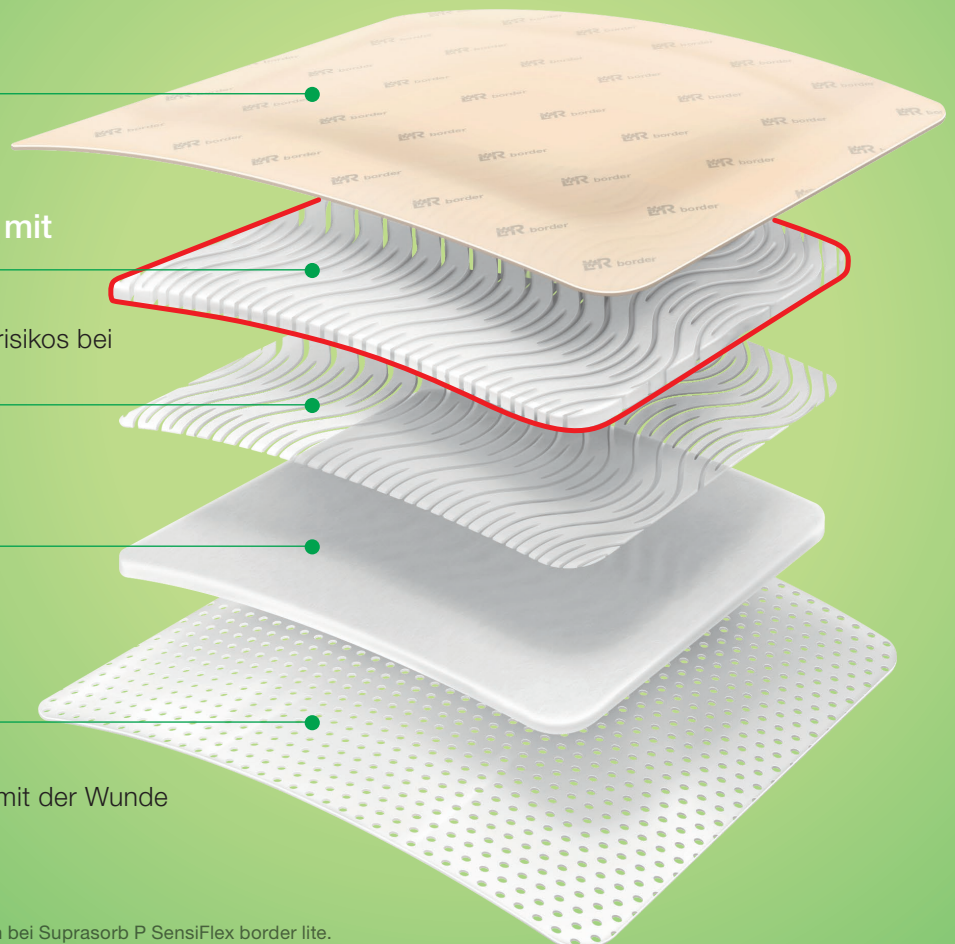

Suprasorb® P SensiFlex **NEU**

Spürbare Vorteile.

Flexibel

in alle Richtungen dank
WaveCut Technology®

- bewegt sich mit dem Patienten und verbessert den **Patientenkomfort***
- kann die **lang anhaltende Haftung** unterstützen
- das anschmiegsame Material **reduziert das Risiko einer frühzeitigen Ablösung***

Effizientes

Exsudatmanagement

- fördert die **Wundheilung**
- vertikale Exsudataufnahme **schützt die Wundränder*****
- **Zeitersparnis** durch längere Tragedauer

Weich

und anschmiegsam

- **atraumatische Entfernung**
- **hautverträglich**
- bietet **Patientenkomfort**



Suprasorb P SensiFlex
ist um bis zu

96 %

anschmiegsamer
als ALLEVYN LIFE.¹

Mit Suprasorb P SensiFlex
wird **der Druck** um bis zu

86 %

reduziert im Vergleich
zu ALLEVYN LIFE.²

Mit Suprasorb P SensiFlex
werden **die Scherkräfte** um bis zu

69 %

reduziert im Vergleich
zu ALLEVYN LIFE.²

94 %

bewerten den **Tragekomfort**
in **besonders beweglichen**
Regionen als **sehr komfortabel**
oder **komfortabel**.³

89 %

bewerten den **Komfort**
beim Nachapplizieren oder
Entfernen des Verbandes
als **sehr komfortabel** oder
komfortabel.³

Suprasorb® P SensiFlex **NEU** Mit WaveCut Technology®.

Exsudationsgrad:

border lite 4 Schichten

für schwach bis mittel exsudierende Wunden



border 5 Schichten

für mittel bis stark exsudierende Wunden



Wundtiefe:

Oberflächliche
Wunden



Tiefe
Wunden*



Kann auf ärztliche Empfehlung als
Sekundärverband für infizierte und
infektgefährdete Wunden verwendet werden.

* Bei tiefen Wunden ggf. eine Tamponade als Primärverband
(z. B. Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb Liquacel) verwenden.



**ZEIT FÜR EIN
UPGRADE**



Quellen:

ALLEVYN ist eine Marke von Smith+Nephew.

- 1) Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG,
DI_TR-00506 – Anschmiegsamkeit
gemäß EN 13726-4. Data on file.
- 2) Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG,
DI_TR-00506 – FE-Analyse B2024280.
Data on file.
- 3) SGS proderm GmbH, Studienr. 24.0344-79.

Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56579 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönau an der Triesting

Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, CH-9014 St. Gallen