



People.Health.Care.

Suprasorb® A Pro

Die neue Generation der
Calciumalginat-Wundverbände.



blutstillende
Wirkung¹



unterstützt die Entfernung
in einem Stück⁴



effektives
Exsudatmanagement





Suprasorb® A Pro


Leistungsstark durch Zellulose-Fasern.

Produktzusammensetzung:


Zellulose-Fasern
verstärkend
und stabilisierend

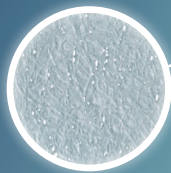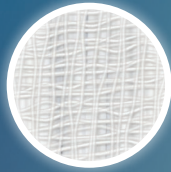

Calciumalginat-Fasern
mit hohem Mannuronsäure-
gehalt für eine weiche und
anschmiegsame Struktur

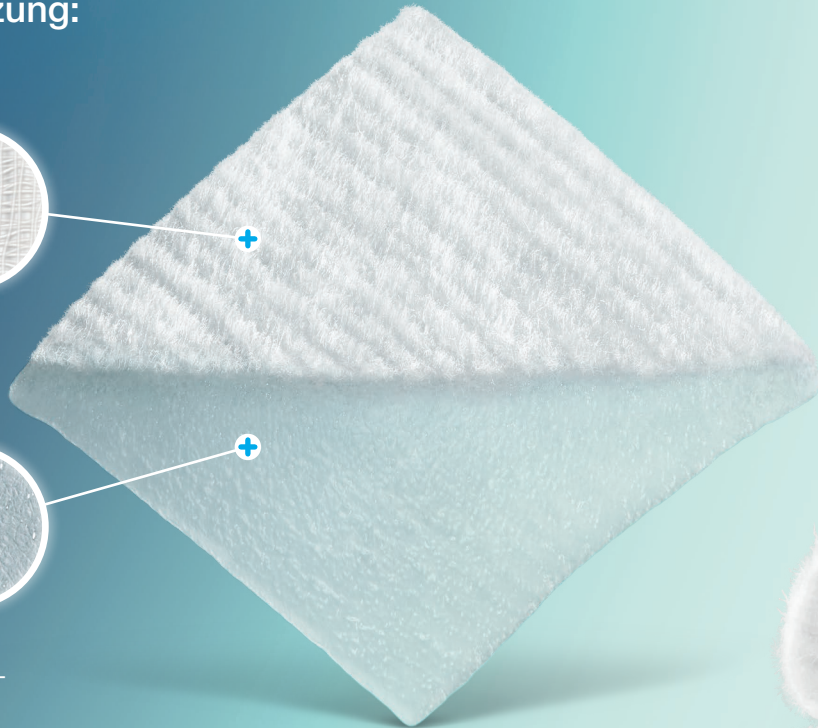

Wundtiefe:

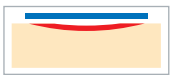

Oberflächliche
Wunden




Tiefe Wunden




Für stark exsudierende Wunden

Exsudationsgrad:


Indikationen:

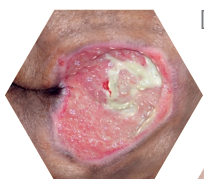

Dekubitus

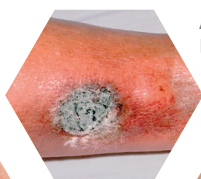

Arterielle
Ulcera

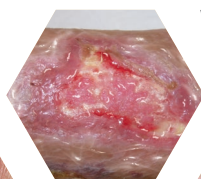


Venöse
Ulcera



Diabetische
Ulcera



Post-
operative
Wunden

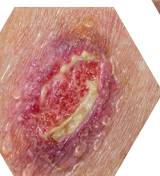

Spalthaut-
entnahme-
stellen



Hinweise:


- erhältlich als Kompresse und Tamponade
- sehr gutes Rückhaltevermögen auch unter **Kompression**⁴
- kann je nach Exsudationsgrad mit geeignetem **Sekundärverband**, z. B. Suprasorb P sensitive, fixiert werden
- vor der Anwendung auf eine beliebige Größe **zuschneidbar**



Suprasorb® A Pro

Für stark exsudierende Wunden.

Die Produkteigenschaften

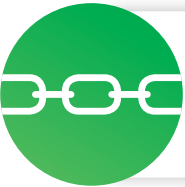

unterstützt die Entfernung
in einem Stück⁴



effektives Exsudat-
management



blutstillende Wirkung¹

Ihr Nutzen

- ermöglicht eine einfache Anwendung⁴
- erhöht die Behandlungssicherheit


- schützt den Wundrand⁴
- unterstützt die Wundheilung durch autolytisches Debridement^{2,3}
- bindet Bakterien und Zelltrümmer³

- durch Abgabe von Calciumionen erfolgt die Aktivierung der Gerinnungsfaktoren
- fördert die Wundheilung^{2,4}

Suprasorb® A Pro

Wirkweise:

- Wundexsudat wird absorbiert
- bei Kontakt mit Wundexsudat bildet sich ein Gel, das ein feuchtes Wundklima aufrechterhält und das autolytische Debridement unterstützt^{3,4}

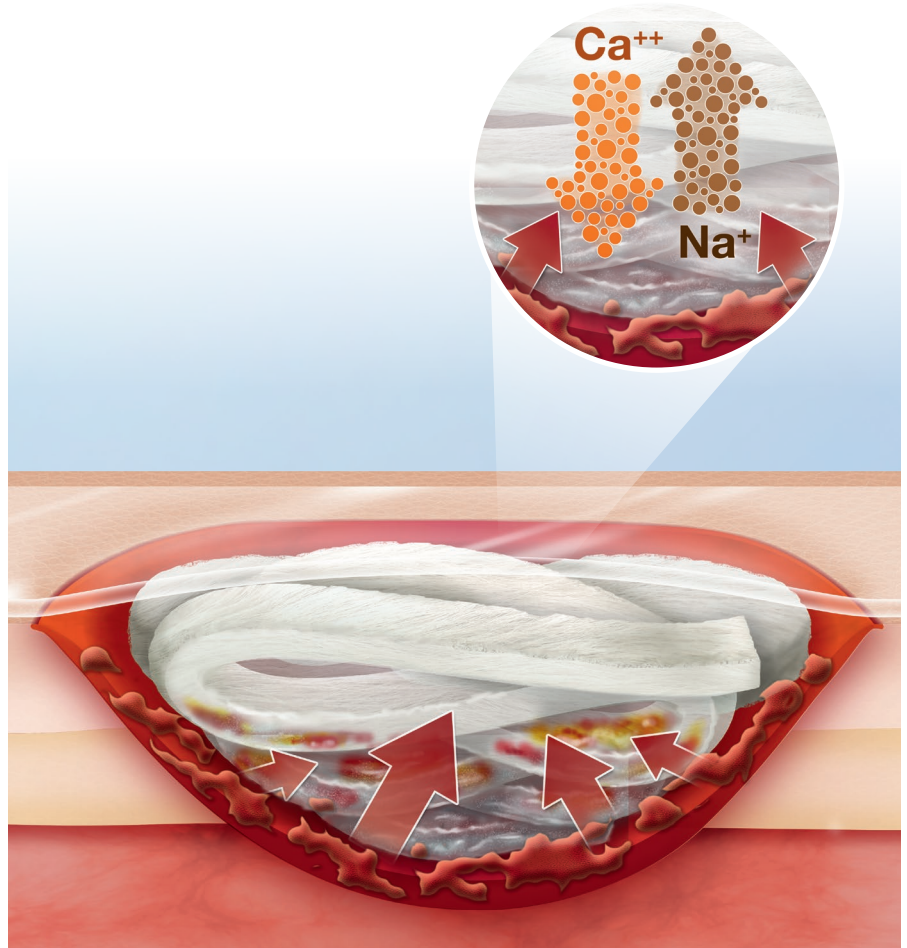

Suprasorb® A Pro

Calciumalginat-Wundverband – das ideale Produkt für die 3-Schritte-Behandlungsempfehlung von L&R.



unterstützt die Entfernung in einem Stück⁴



effektives Exsudatmanagement



blutstillende Wirkung¹



Suprasorb® A Pro

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stk.)
5 x 5	33 932	167 604 11	10/120
10 x 10	33 933	167 604 28	10/200
10 x 20	33 934	167 604 34	5/45
2 x 45	33 935	167 604 40	5/20

Quellen:

- 1) CATR-28
- 2) PAGTR-56
- 3) NPDTR-48
- 4) Roes, C. (2021) Observational Study Suprasorb® A Pro. Study Report. Rengsdorf, Germany (AWB 2020-01)