



People.Health.Care.

Vliwasorb® sensitive border **NEU**

Einfache Anwendung,
gutes Exsudatmanagement,
Reduktion der Keimzahl.



Vliwasorb® sensitive border **NEU**

Superabsorbierender Wundverband mit Silikon und Hafrand.

Polyurethan-Filmschicht

- hoher MVTR-Wert
- wasserdicht, mit Barriere gegen Verunreinigungen von außen

Umschließende atmungsaktive, hydrophile Schicht

- umschließt den Saugkern

Superabsorbierender Saugkern

- zur Aufnahme und Bindung von Exsudat, was das Mazerationsrisiko reduziert
- Wundexsudat kann Keime enthalten – keimhaltiges Exsudat wird im Verband gebunden und beim Verbandwechsel sicher entfernt

Flüssigkeitsdurchlässige Schicht


- umschließt den Saugkern
- das Exsudat wird gleichmäßig verteilt

Silikon-Wundkontaktschicht

- schnelle Aufnahme und Weiterleitung von Exsudat in den Saugkern
- die größeren Poren ermöglichen die Absorption von viskösem Exsudat
- sanft zur Haut

Indikationen:

Exsudationsgrad

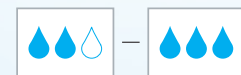

Für mittel bis stark exsudierende Wunden

Wundtiefe




Oberflächliche Wunden



Tiefe Wunden*


Wundtyp

Akute Wunden

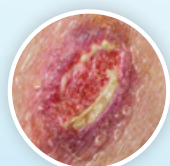


Postoperative Wunden


Chronische Wunden

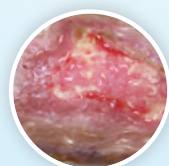

Ulcus cruris

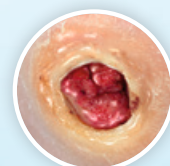

Diabetische Fußulzera

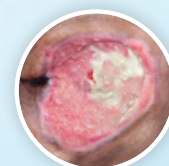

Dekubitus

Vliwasorb sensitive border kann ...

- unter Kompression verwendet werden. 
- mit einem geeigneten Material (z. B. Curafix H, Mollelast) fixiert werden.
- Wundkissen nicht einschneiden. Der Rand kann konkav zugeschnitten oder auseinander-geschnitten werden. 

Vliwasorb® sensitive border **NEU**

Ihr Nutzen.

Die Produkteigenschaften



Einfache Anwendung und atraumatische Entfernung

Ihr Nutzen

- **atraumatische und nahezu schmerzfreie Entfernung/Verbandwechsel**
- **anwenderfreundlicher Hafrand**, der das Anlegen des Wundverbandes erleichtert und eine Neupositionierung ermöglicht



Gutes Exsudatmanagement

- die hohe Aufnahmekapazität ermöglicht lange Verbandwechselintervalle mit langen Wundruhephasen
- die größeren Poren ermöglichen die **Absorption von viskösem Exsudat**
- **reduziert das Mazerationsrisiko**



Reduktion der Keimzahl

- Reduktion der Keimzahl durch **Bindung im Wundverband** (in den Superabsorber); **Entfernung im Rahmen des Verbandwechsels**

Vliwasorb® sensitive border ...

... hält die Form!

Gute Formbeständigkeit auch bei vertikaler Anwendung durch **komprimierte superabsorbierende Polymerschicht**.

Vliwasorb sensitive border **vor der** Anwendung



Vliwasorb sensitive border **mit** maximaler Absorption

... ist praktisch in der Anwendung und gut für den Patienten:

- sanft zur Haut
- bietet sanften Komfort und minimiert Schmerzen bei der Entfernung sowie Traumata für Wunde und Wundumgebung
- Kleidung und Bettwäsche werden durch die praktische Wäscheschutzschicht vor Durchnässung geschützt.

... hat die Fähigkeit, Exsudat aufzunehmen und einzuschließen.

Wundexsudat kann **Bakterien, Pilze** (wie Candida albicans, Candida parapsilosis) sowie **Endotoxine** enthalten.

Exsudat, das diese Substanzen enthält, wird physikalisch im Verband gebunden und beim Verbandwechsel sicher entfernt.



* Das Produkt kann als Sekundärverband in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller (Suprasorb A Pro, Suprasorb A+Ag, Suprasorb Liquacel Pro) zur Versorgung von tiefen Wunden verwendet werden.



People.Health.Care.

Vliwasorb® sensitive border **NEU**

Superabsorbierender Wundverband mit Silikon und Hafttrand –
die ideale Ergänzung zur 3-Schritte-Behandlungsempfehlung von L&R.




Einfache Anwendung
und atraumatische Entfernung



**Gutes Exsudat-
management**



**Reduktion
der Keimzahl**

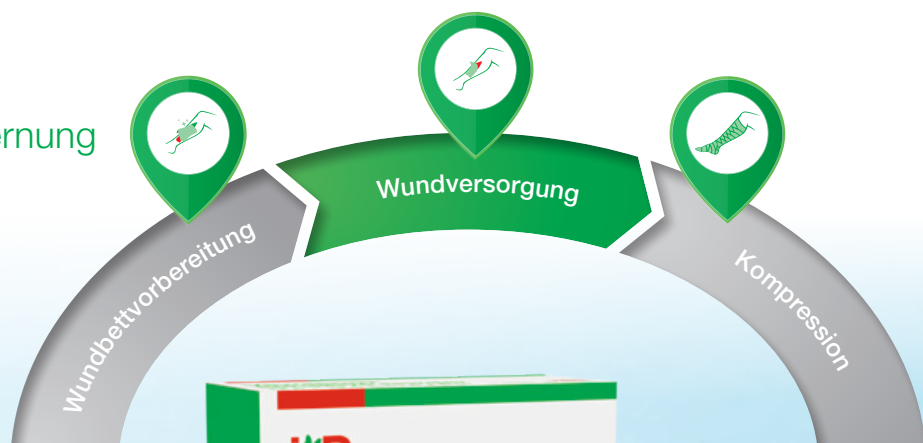

Bestellinformationen

Vliwasorb® sensitive border **NEU**

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe Verband (cm)	Größe Wundkissen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stk.)
10 x 10	5 x 5	159 558	192 238 20	10/200
12,5 x 12,5	7,5 x 7,5	159 559	192 238 37	10/100
17,5 x 17,5	12,5 x 12,5	159 560	192 238 43	10/100
15 x 25	9 x 19	159 561	192 238 66	10/100
20 x 25	14 x 19	159 562	192 238 95	10/100
Sacrum				
23 x 23	17 x 16,5	159 569	192 239 32	10/100



Kennen Sie schon unseren L&R Newsletter?

Jetzt anmelden und immer informiert sein:

Lohmann-Rauscher.com/de-de/service/lr-newsletter



Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönau an der Triesting

Kontaktadressen

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH, Johann-Schorsch-Gasse 4, A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, CH-9014 St. Gallen