



People.Health.Care.

Suprasorb® P non-adhesive **NEU**

Weich, anschmiegsam und saugstark.

Mit verbesserter
Atmungsaktivität,
wodurch überschüssige
Feuchtigkeit aus
dem Verband
verdunsten kann



Die perforierte Wund-
kontaktschicht verhindert ein
Verkleben mit der Wunde



Erhält ein feuchtes
Wundmilieu*



Passt sich dem
Wundbett an

Suprasorb® P non-adhesive **NEU**

Weich, anschmiegsam und saugstark.

Dreischichtiges Material:

Ihr Nutzen:

**Wasserdichte
Folienschicht**

atmungsaktiv und
wasserdampfdurchlässig

**Saugfähiger
PU-Schaum**

effizientes
Exsudatmanagement

**Perforierte nicht klebende
Wundkontaktschicht**

verhindert ein Verkleben
mit der Wunde




Indikationen:

- akute und chronische Wunden wie z. B.: venöse Unterschenkelgeschwüre, Dekubitus, diabetische Fußulcera, Hautentnahme- und -empfängerstellen, Abschürfungen und postoperative Wunden
- für mittel bis stark exsudierende Wunden
- für oberflächliche Wunden und tiefe Wunden (mit geeigneten Wundfüller)
- kann auf ärztliche Empfehlung als Sekundärverband für infizierte und infektgefährdete Wunden verwendet werden



Suprasorb® P non-adhesive

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stück)
5x5	401 180	180 010 23	10/400
7,5x7,5	401 181	180 010 46	10/300
10x10	401 182	180 010 52	10/300
10x12	401 184	198 989 89	10/300
12,5x12,5	401 185	198 990 03	10/300
15x15	401 183	180 010 69	5/200
15x20	401 179	180 010 81	5/200
20x20	401 186	198 989 72	5/100

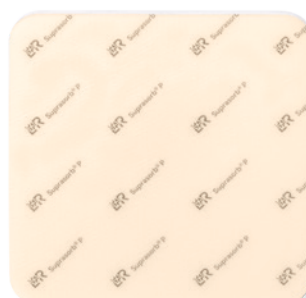

Herausgeber

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönau an der Triesting

Kontaktadresse

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf