

VENOSAN® Prescrizione medica

Calze e collant compressivi



Tabelle di misurazione e determinazione taglie per Calze terapeutiche

Punti di misurazione / circonferenze e lunghezze

Lunghezza

Misura	Modello	Lunghezza (cm)
ℓD	AD / ADH con bordo, corta	35–40
	AD / ADH con bordo, lunga	37–42
ℓG	AGH corta	63–72
	AGH lunga	68–78
ℓK	AGG / AT / ATU Materna corta	67–74
	AGG / AT / ATU Materna lunga	74–85

Circonferenza

Misura	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20–23	23–26	26–29	29–31
cC	29–39	33–42	36–45	39–47
cD	28–38	32–41	35–44	38–46
cG	48–63	54–67	58–72	63–74

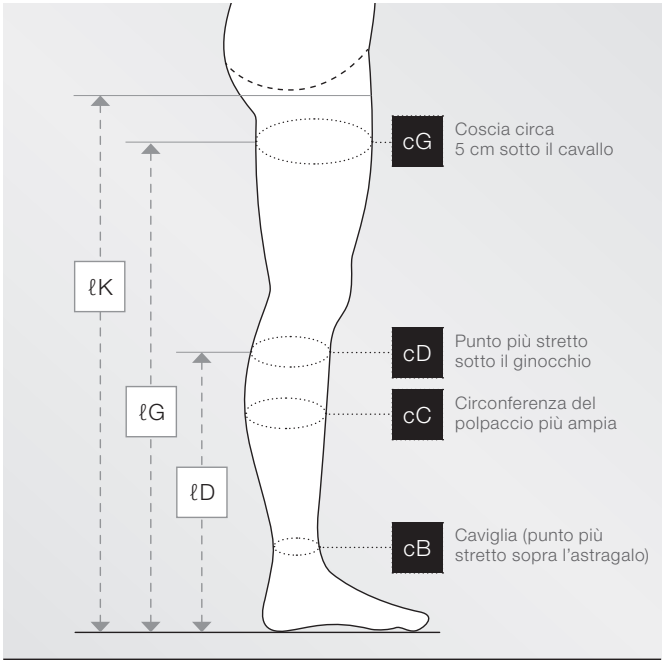


Tabelle di misurazione e determinazione taglie per Calze preventive

VENOSAN® Legline

AD	AGH, AT, ATU Materna
60% 12 mmHg	cF
80% 16 mmHg	cD
	cC
100% 20 mmHg	cB

	XS	S	M	L	XL
cF	42–44	45–47	48–50	51–53	54–60
cD	29–31	32–34	35–37	38–40	41–43
cC	31–33	34–36	37–39	40–42	43–45
cB	20–21	22–23	24–25	26–27	28–29

VENOSAN® Silk

	S	M	L
EUR	36–39	39–42	42–45

VENOSAN® Cotton support

	S	M	L	XL
EUR	36–39	39–42	42–45	45–49

VENOSAN® AES Compressione alla caviglia: 16–18 mmHg

Modello	Circonferenza della caviglia	Circonferenza del polpaccio	Circonferenza della coscia	Lunghezza	Misura
AD	18–20 cm	< 32 cm		< 41 cm	S regolare
				> 41 cm	S lunga
	20–22 cm	32–37 cm		< 43 cm	M regolare
				> 43 cm	M lunga
	23–25 cm	37–42 cm		< 45 cm	L regolare
				> 45 cm	L lunga
	25–27 cm	42–47 cm		< 45 cm	XL regolare
				> 45 cm	XL lunga
AGH	28–30 cm	47–52 cm		< 45 cm	XXL regolare
				> 45 cm	XXL lunga
	18–20 cm	< 32 cm	45–64 cm	< 74 cm	S corta
				74–79 cm	S regolare
				> 79 cm	S lunga
	20–22 cm	32–37 cm	53–71 cm	< 74 cm	M corta
				74–79 cm	M regolare
				> 79 cm	M lunga
AGG	23–25 cm	37–42 cm	61–80 cm	< 74 cm	L corta
				74–79 cm	L regolare
				> 79 cm	L lunga
	25–27 cm	42–47 cm	70–84 cm	< 79 cm	XL regolare
				> 79 cm	XL lunga
	18–20 cm	< 32 cm	45–64 cm	< 74 cm	S corta
				74–79 cm	S regolare
				> 79 cm	S lunga
	20–22 cm	32–37 cm	53–71 cm	< 74 cm	M corta
				74–79 cm	M regolare
				> 79 cm	M lunga
	23–25 cm	37–42 cm	61–80 cm	< 74 cm	L corta
				74–79 cm	L regolare
				> 79 cm	L lunga
	25–27 cm	42–47 cm	70–84 cm	< 79 cm	XL regolare
				> 79 cm	XL lunga

Prescrizione medica Calze terapeutiche



VENOSAN®

Paziente _____

Data _____

Modelli:

☐ AD Gambaletto		☐ AGH Calza Coscia		☐ AGG Monocollant con cintura		☐ AT Collant		☐ ATU Collant Materna	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Linea VENOSAN®:

☐ VENOSAN 3000 COTTON	Naturali e morbide	CCL 1	CCL 2	CCL 3
☐ VENOSAN 4000 MICRO	Raffinate ed eleganti			
☐ VENOSAN 5000 SILVER	Fibre d'argento e cotone			
☐ VENOSAN 7000 STIFF	Elevata rigidità			

Scelta della taglia:

☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------


Colori:

VENOSAN 3000 COTTON	
☐ Beige	
VENOSAN 4000 MICRO	
☐ Mexico	
☐ Marokko	
☐ Sand (sabbia)	
☐ Nero	
☐ Anthracite	
☐ Marine	
☐ Light Lime	
☐ Soft Sky	
VENOSAN 5000 SILVER	
☐ Mexico	
☐ Marokko	
☐ Sand (sabbia)	
☐ Nero	
VENOSAN 7000 STIFF	
☐ Beige	
☐ Nero	

Opzioni:

☐ corta	☐ lunga
☐ punta aperta	☐ punta chiusa
☐ destra (AGG)	☐ sinistra (AGG)
☐ bordo in pizzo (AGH)	☐ bordo puntinato (AGH)

Punti di misurazione:

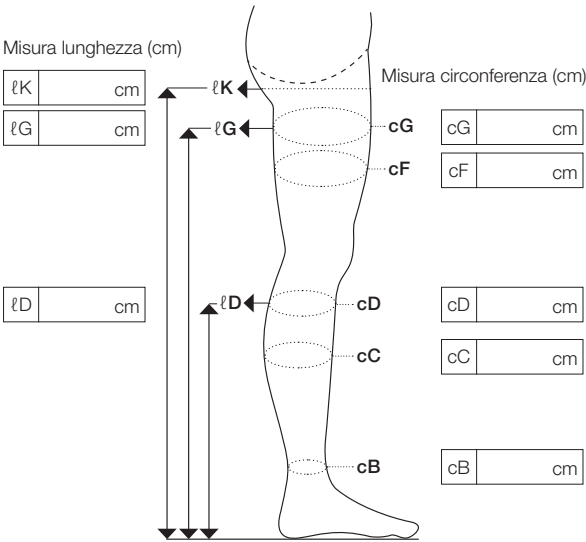

Informazioni per l'ordine:

Ordina facilmente tramite il negozio online www.Redcare.it o nei migliori negozi di Ortopedia

Lohmann & Rauscher srl · Via E.P. Masini 2 · 35131 Padova
Telefono 049 7446600 · www.lohmann-rauscher.it · servizioclienti@it.lrmed.com

Prescrizione medica
Calze preventive



Paziente

Data

Modelli:


☐ AD Gambaletto		☐ AGH Calza Coscia		☐ AT Collant		☐ ATU Collant Materna	
--	--	---	--	---	--	--	--

Linea:

☐ LEGLINE 20	Velate	140 den/20 mmHg
☐ LEGLINE 30	Semivelate	280 den/30 mmHg
☐ SILK SUPPORT	Raffinate ed eleganti	15 – 20 mmHg
☐ COTTON SUPPORT	Naturali e morbide	15 – 20 mmHg
☐ JET LEGS	Efficaci e comode	15 – 20 mmHg

Compressione:

VENOSAN® Legline

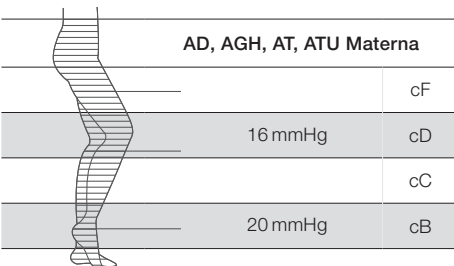

	XS	S	M	L	XL
cF	☐ 42-44	☐ 45-47	☐ 48-50	☐ 51-53	☐ 54-60
cD	☐ 29-31	☐ 32-34	☐ 35-37	☐ 38-40	☐ 41-43
cC	☐ 31-33	☐ 34-36	☐ 37-39	☐ 40-42	☐ 43-45
cB	☐ 20-21	☐ 22-23	☐ 24-25	☐ 26-27	☐ 28-29

VENOSAN® Silk

	S	M	L
EUR	☐ 36-39	☐ 39-42	☐ 42-45

VENOSAN® Cotton support

	S	M	L	XL
EUR	☐ 36-39	☐ 39-42	☐ 42-45	☐ 45-49

VENOSAN® AES

Compressione alla caviglia: 16-18 mmHg

Modello	Circonferenza caviglia	Circonferenza polpaccio	Circonferenza coscia	Lunghezza	Misura
AD	18-20 cm	< 32 cm		< 41 cm	☐ S regolare
				> 41 cm	☐ S lunga
	20-22 cm	32-37 cm		< 43 cm	☐ M regolare
				> 43 cm	☐ M lunga
	23-25 cm	37-42 cm		< 45 cm	☐ L regolare
				> 45 cm	☐ L lunga
	25-27 cm	42-47 cm		< 45 cm	☐ XL regolare
AGH				> 45 cm	☐ XL lunga
	28-30 cm	47-52 cm		< 45 cm	☐ XXL regolare
				> 45 cm	☐ XXL lunga
	18-20 cm	< 32 cm	45-64 cm	< 74 cm	☐ S corta
				74-79 cm	☐ S regolare
				> 79 cm	☐ S lunga
	20-22 cm	32-37 cm	53-71 cm	< 74 cm	☐ M corta
AGG				74-79 cm	☐ M regolare
				> 79 cm	☐ M lunga
	23-25 cm	37-42 cm	61-80 cm	< 74 cm	☐ L corta
				74-79 cm	☐ L regolare
				> 79 cm	☐ L lunga
	25-27 cm	42-47 cm	70-84 cm	< 79 cm	☐ XL regolare
				> 79 cm	☐ XL lunga

Informazioni per l'ordine:

Ordina facilmente tramite il negozio online www.Redcare.it o nei migliori negozi di Ortopedia

Lohmann & Rauscher srl · Via E.P. Masini 2 · 35131 Padova

Telefono 049 7446600 · www.lohmann-rauscher.it · servizioclienti@it.lrmed.com