

Suprasorb® A Pro **NIEUW** en Suprasorb® A+Ag Pro **NIEUW**

Calciumalginaatverband – het perfecte product voor het uit drie stappen bestaande behandeladvies van L&R.



- ondersteunt verwijdering in één geheel⁴
- effectief exsudaatmanagement
- hemostatisch effect¹

Suprasorb® A Pro **NIEUW** en Suprasorb® A+Ag Pro **NIEUW**

Calciumalginaatverband van de volgende generatie.



Suprasorb® A Pro **NIEUW**

Afmetingen (cm)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
5 x 5	33 932	170 879 02	422 972 0	10/120
10 x 10	33 933	170 901 48	422 973 8	10/200
10 x 20	33 934	170 901 56	422 974 6	5/45
2 x 45	33 935	170 901 64	422 975 3	5/20

Suprasorb® A+Ag Pro **NIEUW**

Afmetingen (cm)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
5 x 5	33 926	170 901 72	423 000 9	10/120
10 x 10	33 927	170 901 99	422 976 1	10/200
10 x 20	33 928	170 902 10	422 977 9	5/45
2 x 45	33 929	170 902 29	422 978 7	5/20


Referenties:

- CATR-28
- PAGTR-56
- NPDR-48
- Roes, C. (2021) Observational Study Suprasorb® A Pro. Study Report. Rengsdorf, Germany (AWB 2020-01)

Suprasorb® A Pro **NIEUW**

Werking van het product:

- wondexsudaat wordt geabsorbeerd
- gelvorming treedt op bij contact met wondexsudaat, waardoor een vochtige wondomgeving wordt gecreëerd die autolytisch débridement stimuleert^{3,4}

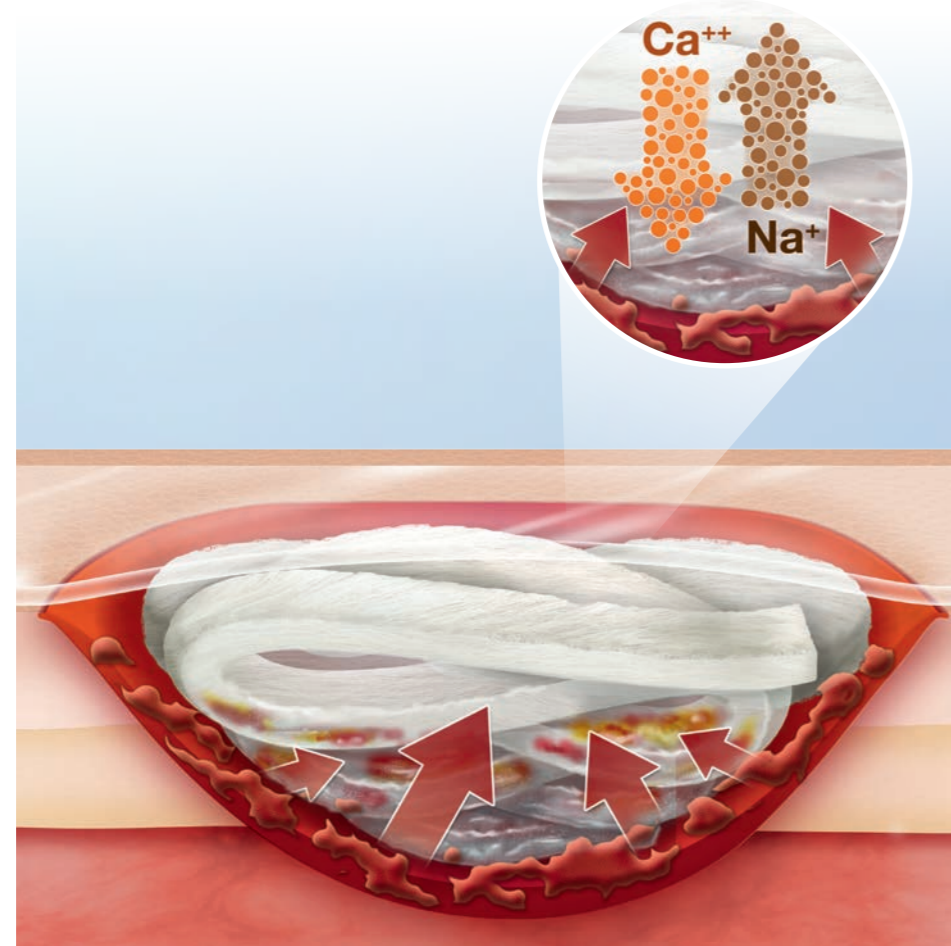


Suprasorb® A Pro NIEUW

Verstevigd met cellulosevezels.

Productsamenstelling:

cellulosevezels
voor stevigheid
en stabiliteit

calciumalginaatvezels
met een hoog gehalte aan
mannuronzuur voor een
zachte en soepele stof

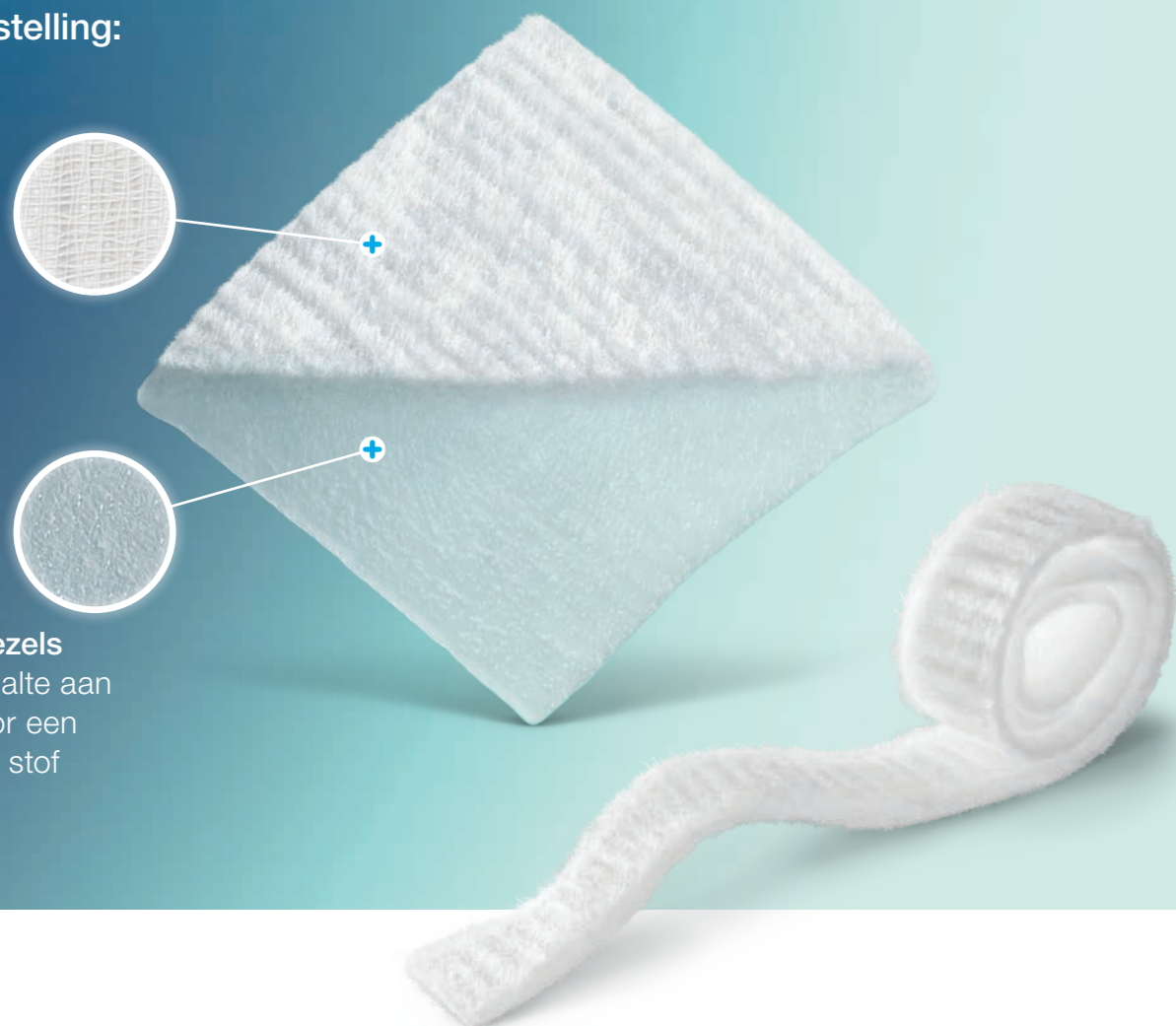

Wonddiepte:



oppervlakkige
wonden




diepe wonden

Hoeveelheid exsudaat:



voor sterk exsuderende wonden

Indicaties:

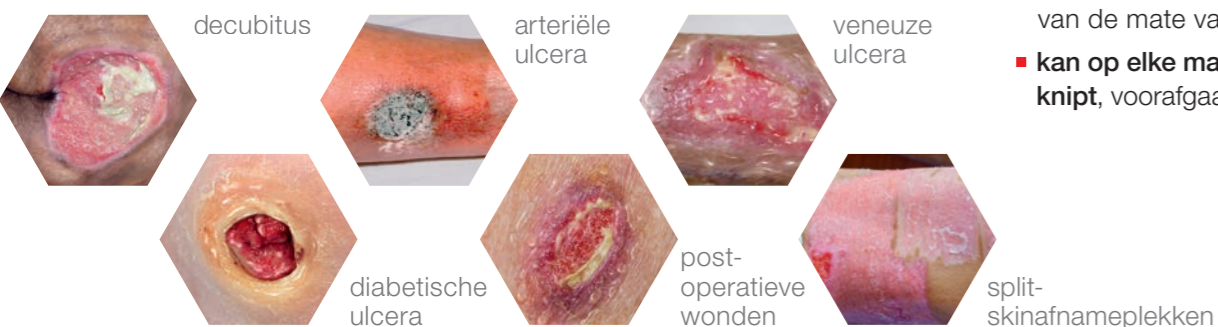

Belangrijke informatie:

- verkrijgbaar als absorberende pad en wondtampoon
- houdt wondvocht uitstekend vast, zelfs onder **compressie**⁴
- kan worden gefixeerd met een hiervoor geschikt **secundair verband**, bv. Suprasorb P sensitive, afhankelijk van de mate van exsudatie
- **kan op elke maat worden bijgeknipt**, voorafgaand aan gebruik

Suprasorb® A Pro NIEUW

Voor sterk exsuderende wonden.

Producteigenschappen:



ondersteunt verwijdering in één geheel⁴



effectief exsudaatmanagement



hemostatisch effect¹

Uw voordelen:

- eenvoudig te **gebruiken**⁴
- verhoogt de **behandelveiligheid**

- beschermt de wondranden⁴
- ondersteunt de wondgenezing door autolytisch débridement^{2,3}
- bindt bacteriën en celresten³

- het vrijkomen van calciumionen activeert coagulatiefactoren
- stimuleert de wondgenezing^{2,4}

Suprasorb® A+Ag Pro NIEUW

Voor wonden met infectierisico en voor geïnfecteerde wonden.



breedspectrum-antimicrobiële werking*

- effectief tegen bacteriën en schimmels, waaronder **MRSA en VRE***
- verlaagt het risico op infectie



vermindering van het aantal pathogenen*


- blijft stabiel gedurende maximaal 7 dagen*
- stimuleert de wondgenezing^{2,4}

Suprasorb® A+Ag Pro NIEUW

met zilveralginaatvezels

Werking van het product:

- wondexsudaat wordt geabsorbeerd
- tijdens de absorptie worden natriumionen vervangen door calciumionen en wordt er een gel gevormd
- het vrijkomen van zilverionen draagt bij aan het antimicrobiële effect

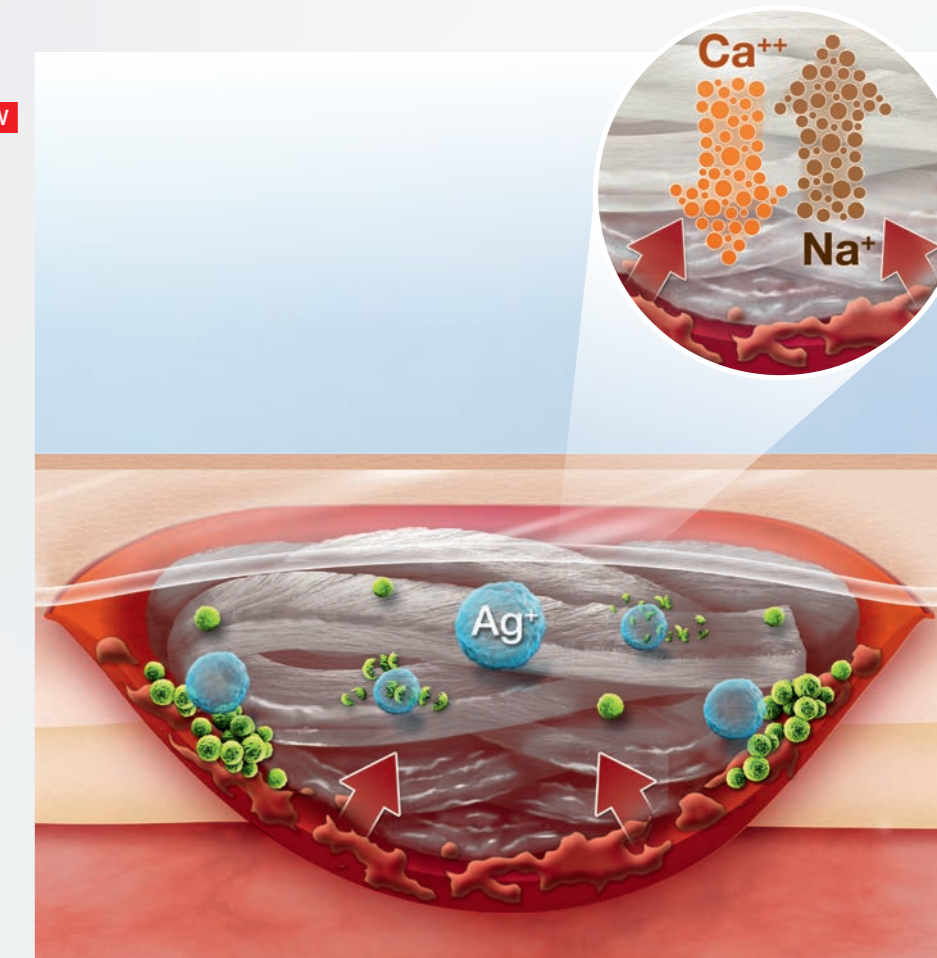

*op basis van in-vitro-gegevens