

## Debrisoft® Pad

### De gouden standaard voor mechanisch débridement.



Debrisoft – de eenvoudige en vrijwel pijnloze methode voor débridement, die al binnen 2–4 minuten overtuigt met zichtbare resultaten. Het maakt een doelgerichte verwijdering mogelijk van débris en exsudaat uit

de wond, alsmede schilfers en keratoses van de omliggende huid. Reeds ingegroeid granulatieweefsel en epitheelcellen worden ontzien.

#### Toepassingsgebieden

- Débridement van oppervlakkige, chronische en acute wonden en van de huid rondom de wond.
  - ◆ diabetische ulcera
  - ◆ arteriële en veneuze ulcera
  - ◆ decubitus
  - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
  - ◆ traumatische of postoperatieve wonden (bv. schaafwonden, incisies, laceraties)
  - ◆ verbrandingen en brandwonden (derdegraads: na chirurgisch débridement)
  - ◆ lymfoedeem
- Geschikt voor de droge, perkamentachtige, hyperkeratotische, seborroïsche of vette gezonde of beschadigde huid.

#### Beoogd gebruik


Debrisoft Pad is bedoeld voor een snel, bijzonder effectief, veilig en vrijwel pijnloos débridement. Debrisoft Pad wordt gebruikt voor het opnemen van exsudaat, débris en huidkeratoses tijdens het débridement, en ontziet intact weefsel.

#### Eigenschappen

- de afgeschuinde vezeluiteinden verwijderen actief débris en exsudaat uit de wond
- het vezelverband neemt de losgekomen aanslag en keratoses op, houdt ze vast en verwijdert ze
- nieuw gevormd granulatieweefsel en reeds ingegroeide epitheelcellen worden ontzien

## Debrisoft® Pad

De gouden standaard voor mechanisch débridement.

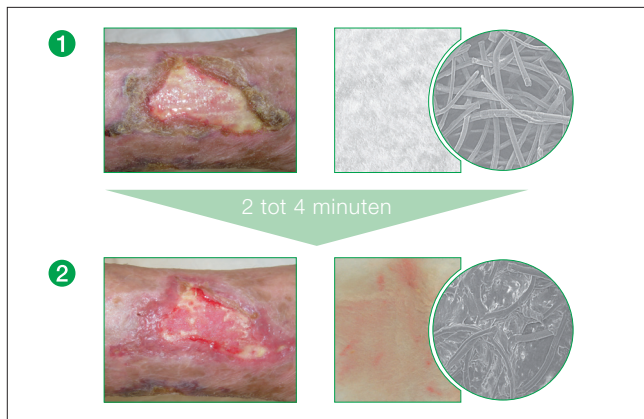

### Snel zichtbare resultaten

- 1 links: Wond vóór de eerste toepassing, rechts: Debrisoft vóór het gebruik
- 2 links: Wond na de eerste toepassing, rechts: Debrisoft na de eerste toepassing

### Voordelen

- bijzonder effectief débridement
- vrijwel pijnloos débridement
- Debrisoft verwijdert biofilm\*
- wordt door patiënten zeer goed geaccepteerd
- eenvoudig te gebruiken

\* Voor een geslaagd management van de biofilm moet na de wondreiniging met Debrisoft een antimicrobiële behandeling worden gegeven.

### Productsamenstelling

- Samenstelling: 100% polyester, ongebleekt
- Rugcoating: 100% polyacryl (colofonium- en colofoniumderivatvrij)
- Steekzak: polyester, polyamide, elastaan
- Etiket: polyester

### Opmerking

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- Debrisoft Pad mag niet worden bijgeknipt

### Tip

- leidt ook bij sterk keratotische, necrotisch beleg tot een bijzonder goed resultaat als deze eerst autolytisch behandeld is
- de zachte vezelkant kan met elke gangbare wondspoeloplossing worden bevochtigd

## Debrisoft® Pad

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	Z-Indexnummer	SC/TC
10 x 10	34 321	15 668 762	5 / 50
13 x 20	34 323	16 845 390	5 / 50